



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6540



PHILIPS

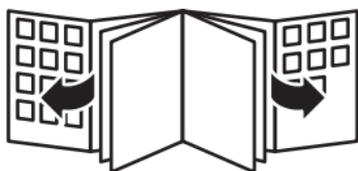

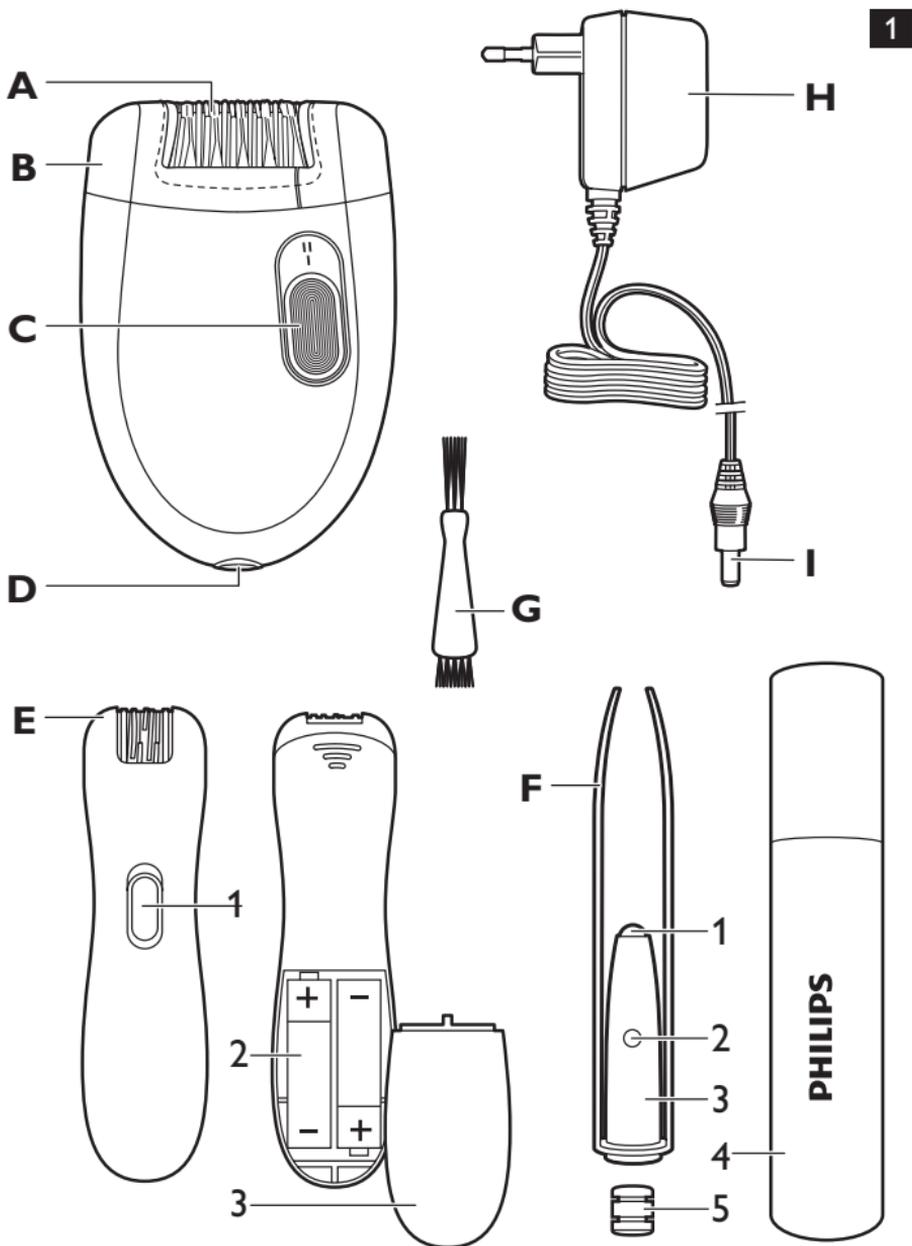

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Эпилятор Philips Satinelle разработан с учетом потребностей современной женщины и произведен в Европе в соответствии с высочайшими техническими стандартами. В процессе создания и производства мы руководствуемся мнением многих женщин из разных стран мира, которые делятся с нами своими впечатлениями о наших разработках и изделиях, что позволяет нашей компании обеспечивать высочайшее качество продукции.

Благодаря беспроводному прецизионному эпилятору, который также подходит для чувствительных и труднодоступных участков, ваша кожа надолго останется идеально гладкой.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Эпиляционные диски
- B** Эпиляционная головка
- C** Переключатель вкл./выкл.
 - O = выключено
 - I = нормальная скорость
 - II = высокая скорость
- D** Разъем для подключения адаптера
- E** Прецизионный эпилятор
 - 1** Переключатель вкл./выкл.
 - 2** Незаряжаемые батареи
 - 3** Крышка отсека для батарей
- F** Усовершенствованный пинцет
 - 1** Лампа усовершенствованного пинцета
 - 2** Кнопка вкл./выкл. лампы
 - 3** Отсек для батарей и лампы
 - 4** Чехол для усовершенствованного пинцета
 - 5** Батареи таблеточного типа
- G** Щеточка для очистки
- H** Адаптер

I Штекер прибора

Важно!

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Не допускайте попадания жидкости на приборы и адаптер.
- Не пользуйтесь приборами рядом с наполненной водой ванной или раковиной (Рис. 2).
- Не пользуйтесь приборами в ванной или под душем (Рис. 3).
- При использовании эпилятора в ванной не пользуйтесь удлинителем (Рис. 4).

Предупреждение.

- Заряжайте эпилятор только с помощью прилагаемого адаптера.
- Не используйте приборы или адаптер, если они повреждены.
- Во избежание травм не используйте усовершенствованный пинцет, если он поврежден или сломан.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Перед подключением эпилятора к электросети убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению местной электросети.
- Данные приборы не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда приборы используются под контролем и при инструктировании со стороны лиц, ответственных за безопасность таких людей.
- Не разрешайте детям пользоваться приборами или играть с ними.

- Храните усовершенствованный пинцет в недоступном для детей месте и не позволяйте детям играть с ним.

Внимание!

- Эпилятор разработан специально для женщин и предназначен только для удаления волос на ногах. Прецизионный эпилятор предназначен для удаления волос в области бикини и подмышек, в таких труднодоступных местах, как колени и лодыжки, эпиляции волос над верхней губой и на подбородке. Не используйте прибор для других целей.
- Из гигиенических соображений приборами и усовершенствованным пинцетом должен пользоваться только один человек.
- Во избежание повреждений или травм не следует держать **включенные** приборы рядом с волосами, бровями, ресницами, одеждой, нитками, проводами, щетками и т.п.
- Перед использованием приборов и усовершенствованного пинцета обязательно проконсультируйтесь с врачом, если имеется раздражение кожи, а также при наличии варикозного расширения вен, сыпи, прыщей, родинок (с волосками) или ранок.
- Лицам с пониженным иммунитетом, при сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных состояниях пользоваться прибором можно также только после консультации с врачом.
- После первых нескольких процедур эпиляции может появиться раздражение и покраснение кожи. Это обычное явление, которое вскоре пройдет. При более частом использовании кожа привыкнет к эпиляции, а волоски станут мягче и тоньше. Если в течение трех дней раздражение не исчезнет, следует обратиться к врачу.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденной или изношенной эпиляционной головкой: это может привести к травме.
- Температура при использовании прибора не должна быть ниже 5 °С или выше 35 °С.
- Используйте прецизионный эпилятор только со щелочными незаряжаемыми батареями типа AA 1,5 В.

- Используйте усовершенствованный пинцет только со щелочными батареями таблеточного типа L763H или AG3 (диаметр 7,8 x 3,4 мм).
- Уровень звуковой мощности эпилятора (Lw) составляет 72B(A). Уровень звуковой мощности прецизионного эпилятора (Lw) составляет 75dB(A).

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Советы по проведению процедуры эпиляции

Перед эпиляцией

Примечание. Перед первым использованием эпиляционную головку эпилятора и прецизионный эпилятор необходимо очистить.

- Чтобы освоить процедуру эпиляции, первое использование приборов рекомендуется проводить на участке с незначительным количеством волосков.
- Рекомендуется проводить процедуру эпиляции вечером перед сном, так как возможное раздражение кожи проходит за ночь.
- Процедура эпиляции проходит легче сразу после душа или ванны. При этом кожа должна быть абсолютно сухой.
- Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами.
- Оптимальная для эпиляции длина волосков составляет 3–4 мм. Если волоски длиннее, мы рекомендуем сбрить их и провести эпиляцию через 1–2 недели, после того как волоски немного отрастут.
- Циклы роста волос различаются, поэтому для достижения оптимальных результатов рекомендуется проводить эпиляцию несколько дней подряд после первого сеанса. Это поможет задержать появление щетины, так как волоски будут расти с одной скоростью.

Во время эпиляции

- При проведении эпиляции оттяните кожу свободной рукой, при этом волосы приподнимаются. Это помогает уменьшить неприятные ощущения.
- Чтобы достичь максимального эффекта, расположите эпиляционную головку перпендикулярно к поверхности тела (под углом 90°), чтобы кнопка питания была направлена в сторону перемещения прибора. Перемещайте эпилятор по коже против направления роста волос, не надавливая на него.
- На некоторых областях тела волосы растут в разных направлениях. В этом случае, чтобы достичь наилучших результатов, необходимо перемещать прибор соответственно в различных направлениях.
- При выделении пота во время эпиляции удалите его с помощью мягкой ткани, насухо протерев кожу.

После эпиляции

- Чтобы успокоить кожу после эпиляции, рекомендуем нанести увлажняющий крем сразу или спустя несколько часов после эпиляции в зависимости от вашего типа кожи.
- После эпиляции области подмышек используйте мягкий дезодорант, не содержащий спирта, или специальный дезодорирующий крем для кожи после эпиляции.
- В течение 24 часов после каждого сеанса эпиляции обрабатывайте поверхность кожи отшелушивающей губкой или кремом (например, во время душа), так как мягкое скрабирование позволяет удалить верхний слой кожи, что способствует правильному росту тонких волосков и предотвращает их вращение.

Использование эпилятора**Подключение прибора**

- 1** Подключите штекер к прибору (Рис. 5).
- 2** Подключите адаптер к розетке электросети.

Эпиляция ног

- 1** Чтобы включить прибор, выберите соответствующую скорость (Рис. 6).

Используйте скорость вращения II. Для эпиляции на участках с незначительным ростом волос, на труднодоступных участках и на участках, где кости расположены близко к поверхности кожи, например, на коленях или лодыжках, устанавливайте скорость вращения I.

- 2** Свободной рукой оттяните кожу, чтобы приподнять волоски.

- 3** Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора (Рис. 7).

- 4** Медленно перемещайте эпилятор против направления роста волос. (Рис. 8)

Слегка прижмите прибор к коже.

Использование прецизионного эпилятора

Установка батарей

- 1** Снимите крышку отсека для батарей, сдвинув ее вниз (Рис. 9).
- 2** Установите в отсек две щелочные батареи типа AA 1,5 В (Рис. 10).

Примечание. При установке батарей соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями “+” и “-” в отсеке для батарей.

Примечание. Время работы при установке новых батарей составляет около 40 минут.

- 3** Установите крышку отсека для батарей на место.

Не допускайте короткого замыкания батарей и контакта металлических предметов с их клеммами.

Эпиляция при помощи прецизионного эпилятора

Используйте прецизионный эпилятор для эпиляции области подмышек, линии бикини, над верхней губой и на подбородке и в труднодоступных местах.

- 1** Тщательно очистите кожу перед эпиляцией от остатков дезодоранта, крема и т.п. Затем аккуратно вытрите кожу насухо.
- 2** Включите прибор.
- 3** Расположите эпиляционную головку под углом 90° к поверхности кожи, чтобы переключатель вкл./выкл. был направлен в сторону перемещения прибора.

Примечание. Свободной рукой оттяните кожу.

- 4** Во время эпиляции области подмышек или линии бикини медленно перемещайте эпилятор по коже в направлении против роста волос.

- Производите эпиляцию линии бикини как показано на рисунке (Рис. 11).
- Выполните эпиляцию подмышек, как показано на рисунке. Поднимите руку, чтобы кожа растянулась. Перемещайте прибор в разных направлениях, чтобы захватить все волоски (Рис. 12).

- 5** Для эпиляции области вокруг рта (верхняя губа и подбородок) следуйте приведенным ниже инструкциям.

Совет. Эпиляцию области вокруг рта рекомендуется выполнять вечером перед сном, так как за ночь раздражение и мелкие повреждения кожи проходят. Во время первых сеансов эпиляции области вокруг рта весьма вероятно раздражение и мелкие повреждения кожи, так как эти участки очень чувствительны.

- Расположите эпилятор под углом 90° к поверхности кожи и медленно передвигайте его в направлении против роста волос (Рис. 13).

Примечание. Чтобы сделать эпиляцию максимально комфортной, оттяните кожу вокруг рта свободной рукой. Не прижимайте

эпилятор к коже слишком сильно. Медленно перемещайте прибор по коже в направлении против роста волос.

- Также эпилятор можно передвигать в разных направлениях, чтобы захватить все волоски (Рис. 14).

Совет. Чтобы успокоить кожу после эпиляции, рекомендуем нанести увлажняющий крем сразу или спустя несколько часов после эпиляции в зависимости от вашего типа кожи.

Не используйте прибор для удаления волос на участках с родинками.

Не используйте прибор для эпиляции бровей и ресниц.

Использование усовершенствованного пинцета

В комплект данного эпилятора входит усовершенствованный пинцет со встроенной лампой для упрощения удаления волос на лице, например, для коррекции бровей. Усовершенствованный пинцет находится в специальном чехле с зеркалом, что очень удобно для использования вне дома. Усовершенствованный пинцет поставляется с 3 установленными батареями таблеточного типа и готов к использованию сразу после приобретения.

Использование усовершенствованного пинцета

- 1** Протрите брови тоником для кожи или спиртосодержащим веществом, чтобы волоски не ускользали от пинцета.
- 2** Перед процедурой смягчите кожу теплой салфеткой для лица. Это упрощает удаление волосков.
- 3** Причешите брови в направлении роста волос.
- 4** С помощью карандаша для глаз очертите желаемый контур бровей. Затем удалите волоски за пределами контура.
- 5** Включите лампу, один раз нажав кнопку вкл./выкл.
- 6** Волоски следует удалять только по направлению роста волос.

Примечание. Удаляйте волосы по одному.

Не используйте усовершенствованный пинцет для удаления волок на участках с родинками.

Не направляйте лампу усовершенствованного пинцета в глаза.

Замена батареек

1 Откройте отсек для батарей и лампы, для этого поверните нижнюю панель против часовой стрелки с помощью монеты (Рис. 15).

2 Извлеките старые батареи таблеточного типа.

Храните батареи таблеточного типа в недоступном для детей и животных месте. Такие батареи могут представлять опасность удушья.

3 Вставьте новые батареи таблеточного типа так, чтобы сторона с отрицательным контактом была направлена в сторону отсека для батарей и лампы (Рис. 16).

Примечание. Усовершенствованный пинцет работает только от трех щелочных батарей таблеточного типа L736H или AG3 (диаметр 7,8 x 3,4 мм).

4 Установите нижнюю панель на отсек для батарей и лампы, для этого поверните ее по часовой стрелке с помощью монеты (Рис. 17).

Очистка и уход

Очистка эпилятора

Примечание. Очищайте эпилятор после каждого использования.

Примечание. Перед тем как начать очистку эпилятора, убедитесь, что он выключен и отсоединен от электросети.

Запрещается использовать для чистки эпилятора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Запрещается промывать эпилятор или адаптер под струей воды (Рис. 18).

Не допускайте попадания жидкости на эпилятор и адаптер (Рис. 19).

Очистка эпиляционной головки

- 1** Сдвиньте эпиляционную головку по стрелке на задней панели (1) и снимите ее с прибора (2) (Рис. 20).
- 2** Промойте эпиляционную головку, поворачивая ее под струей воды в течение 5-10 секунд.
- 3** Стряхните воду с эпиляционной головки (Рис. 21).
- 4** Тщательно протрите ее полотенцем.

Примечание. Необходимо, чтобы эпиляционная головка перед установкой на прибор была абсолютно сухой.

Примечание. Также эпиляционную головку можно очищать щеточкой, которая поставляется в комплекте. Во время очистки поворачивайте эпиляционные диски пальцем (Рис. 22).

Очистка прецизионного эпилятора

Запрещается погружать прецизионный эпилятор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды (Рис. 23).

- 1** Регулярно очищайте прецизионный эпилятор, удаляя волоски щеточкой для очистки. Не включайте прибор во время очистки (Рис. 24).
- 2** Для очистки прибора пользуйтесь сухой тканью.

Замена деталей

Эпилятор

Все детали прибора могут быть заменены. Если необходимо заменить одну из деталей, обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.

Прецизионный эпилятор

Замене подлежит крышка отсека для батарей. При необходимости ее замены обратитесь в торговую организацию или авторизованный сервисный центр Philips.

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте приборы вместе с бытовыми отходами. Передайте их в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 25).

Прецизионный эпилятор и усовершенствованный пинцет

- Незаряжаемые батареи содержат вещества, загрязняющие окружающую среду. Не выбрасывайте незаряжаемые батареи вместе с бытовыми отходами. Передайте их в официальный специализированный пункт утилизации. Необходимо извлечь незаряжаемые батареи, перед тем как передать прибор для утилизации в специализированный пункт (для прецизионного эпилятора)/перед утилизацией вместе с бытовыми отходами (для усовершенствованного пинцета) (Рис. 26).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или обслуживания, а также в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips **www.philips.com** или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в торговую организацию Philips.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Tento epilátor Satinelle od spoločnosti Philips bol navrhnutý tak, aby spĺňal potreby súčasných žien, a bol vyrobený v Európe v súlade s najvyššími technickými normami. Do vývoja a výrobného procesu našich výrobkov zapájame veľa žien z celého sveta, aby sa vyjadrili k našim návrhom a výrobkom. Vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť tú najvyššiu kvalitu. Vychutnajte si perfektnú a dlho hladkú pokožku s bezdrôtovým epilátorom na dôkladnú epiláciu aj na citlivých a ťažko dostupných miestach.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Epilačné disky
- B** Epilačná hlava
- C** Vypínač
 - O = vypnuté
 - I = bežná rýchlosť
 - II = vysoká rýchlosť
- D** Zásuvka pre pripojenie koncovky napájania
- E** Epilátor na dôkladnú epiláciu
 - 1** Vypínač
 - 2** Nenabíjateľné batérie
 - 3** Kryt priečinka na batérie
- F** Pinzeta Smart Tweezers
 - 1** Svetlo pinzety Smart Tweezers
 - 2** Vypínač svetla
 - 3** Priečinnok na batérie a svetlo
 - 4** Odkladacie puzdro na pinzetu Smart Tweezers
 - 5** Gombíkové batérie
- G** Čistiaca kefka
- H** Adaptér
- I** Koncovka napájania

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Zariadenia a adaptér udržiavajte v suchu.
- Zariadenia nepoužívajte v blízkosti umývadla ani nad ním, ani nad vaňou s napustenou vodou (Obr. 2).
- Zariadenia nepoužívajte vo vani ani v sprche (Obr. 3).
- V prípade, že epilátor používate v kúpeľni, nepoužívajte predlžovací kábel (Obr. 4).

Varovanie

- Epilátor používajte výlučne s dodaným adaptérom.
- Zariadenia ani adaptér nepoužívajte, ak sú poškodené.
- Ak je pinzeta Smart Tweezers poškodená alebo zlomená, nepoužívajte ju, aby ste si neublížili.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Pred pripojením epilátora do siete skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
- Tieto zariadenia nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie týchto zariadení osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadeniami.
- Pinzeta Smart Tweezers nie je hračka. Skladujte ju mimo dosahu detí.

Upozornenie

- Epilátor je určený iba na odstraňovanie chĺpkov z ženských nôh. Epilátor na dôkladnú epiláciu je určený na epiláciu chĺpkov zo ženského tela v oblasti bikín a v podpazuší, na ťažko dostupných miestach, ako napríklad na kolene a na členku, a na odstraňovanie

chĺpkov na vrchnej pere a brade. Tieto zariadenia nepoužívajte na iný účel.

- Z hygienických dôvodov môže zariadenia a pinzetu Smart Tweezers používať iba jedna osoba.
- Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, nepribližujte sa so **zapnutými** zariadeniami ku vlasom, mihalniciam, obočiu, oblečeniu, nitiam, káblom, kefám atď.
- Zariadenia a pinzetu Smart Tweezers nepoužívajte na epiláciu podráždenej pokožky ani na pokožku s kĺčovými žilami, vyrážkami, fliačikmi, materskými znamienkami (s chĺpkami) alebo ranami, ale najskôr sa poraďte so svojím lekárom.
- Osoby s oslabenou imunitou alebo trpiace na cukrovku, hemofliu, prípadne imunitnú nedostatočnosť sa tiež musia najskôr poradiť so svojím lekárom.
- Po prvých epiláciách môže pokožka sčervenat' a byt' podráždená. Ide o bežný jav, ktorý sa čoskoro stratí. Pri pravidelnom používaní epilátora si pokožka na epiláciu privykne, podráždenie pokožky sa zmierni a nové chĺpky narastú tenšie a jemnejšie. Ak podráždenie pokožky neprejde ani po troch dňoch, odporúčame Vám poradiť sa s lekárom.
- Epilačné hlavy nepoužívajte, ak sú poškodené alebo zlomené, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie.
- Strojček nevystavujte teplotám nižším ako 5 °C alebo vyšším ako 35 °C.
- Do epilátora na dôkladnú epiláciu vkladajte iba nenabíjateľné alkalické batérie AA 1,5V.
- Pinzeta Smart Tweezers sa môže napájať len alkalickými gombíkovými batériami typu L763H alebo AG3 (priemer 7,8 x 3,4 mm).
- Akustický výkon epilátora (Lw) je 72 dB(A). Akustický výkon epilátora na presnú epiláciu (Lw) je 75 dB(A).

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Tipy pre epiláciu

Pred začatím epilácie

Poznámka: Pred prvým použitím vždy očistite epilačnú hlavu epilátora a epilátora na presnú epiláciu.

- Ak používate zariadenia prvýkrát, odporúčame Vám, aby ste zariadenia vyskúšali na ploche pokožky s redšími chlčkami a zistili, ako si pokožka na epiláciu privyká.
- Odporúčame Vám uskutočniť epiláciu pred spaním, pretože prípadné podráždenie pokožky zvyčajne cez noc zmizne.
- Epilácia je jednoduchšia po kúpaní alebo sprche. Pred epiláciou však pokožka musí byť suchá.
- Uistite sa, že vaša pokožka je čistá, úplne suchá a nie je mastná. Pred začiatkom epilácie nepoužívajte žiaden krém.
- Epilácia je jednoduchšia a pohodlnejšia, keď majú chlčky optimálnu dĺžku 3 – 4 mm. Ak sú chlčky dlhšie, odporúčame Vám, aby ste miesta najskôr oholili a po 1 alebo 2 týždňoch depilovali kratšie, dorastajúce chlčky.
- Keďže chlčky dorastajú v rôznom čase, je najlepšie epilovať ich niekoľko dní za sebou. Týmto spôsobom bude Vaša pokožka dlhšiu dobu hladká, pretože chlčky začnú dorastať v rovnakom čase a rovnako rýchlo.

Počas epilácie

- Počas epilácie voľnou rukou napnite pokožku. Tým sa chlčky nadvihnú a zníži sa pocit ťahania pri ich odstraňovaní.
- Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov epilačnú hlavu priložte na pokožku pod uhlom 90°, aby vypínač smeroval na miesta, kam sa budete so zariadením pohybovať. Zariadenie posúvajte po pokožke proti smeru rastu chlčkov súvislým pomalým pohybom bez toho, aby ste zariadením na pokožku tlačili.
- Na niektorých oblastiach môžu chlčky rásť rozličnými smermi. V tomto prípade môže byť nápomocné pohybovať zariadením rôznymi smermi, aby ste dosiahli optimálne výsledky.
- Ak sa počas epilácie potíte, pokožku si utrite jemnou tkaninou.

Po epilácii

- Odporúčame Vám, aby ste okamžite alebo niekoľko hodín po epilácii (v závislosti od toho, čo viac vyhovuje Vašej pokožke) naniesli na pokožku hydratačný krém, aby sa uvoľnila.
- Po epilácii v podpazuší použite jemný dezodorant bez alkoholu alebo špeciálny dezodoračný krém pre epilovanú pokožku.
- Pravidelným používaním peelingovej špongie alebo krému (napr. počas sprchovania) 24 hodín po epilácii pomáhate predchádzať zarastaniu chĺpkov, pretože jemný pohyb pri umývaní odstraňuje vrchnú vrstvu pokožky, aby sa jemné chĺpky mohli dostať cez povrch pokožky.

Používanie epilátora

Pripojenie zariadenia

- 1** Koncovku napájania zasuňte do zariadenia (Obr. 5).
- 2** Adaptér pripojte do zásuvky.

Epilácia nôh

- 1** Zvolením želanej rýchlosti zariadenie zapnite (Obr. 6).
Uprednostnite používanie rýchlosti II. Na Rýchlosť I prepnite pri epilácii oblastí s redším ochlpením, ťažko dostupných oblastí a miest, kde sa kosti nachádzajú tesne pod povrchom pokožky, ako sú kolená a členky.
- 2** Pomocou voľnej ruky napnite pokožku, aby sa chĺpky vzpriamili.
- 3** Epilátor oprite kolmo na povrch pokožky. Vypínač má byť otočený v smere pohybu zariadenia (Obr. 7).
- 4** Zariadením po pokožke pohybujte pomaly proti smeru rastu chĺpkov. (Obr. 8)
Strojček jemne pritlačte na pokožku.

Používanie epilátora na dôkladnú epiláciu

Vloženie batérií

- 1** Kryt priečinka na batérie zložte posunutím nadol (Obr. 9).

- 2** Do priečinka na batérie vložte dve alkalické batérie AA 1,5 V (Obr. 10).

Poznámka: Dbajte na to, aby póly + a - batérií boli založené podľa označenia v priečinku pre batérie.

Poznámka: Nové batérie zabezpečujú prevádzku až 40 minút.

- 3** Kryt priečinka na batérie znova nasuňte na zariadenie.

Dbajte na to, aby sa kovové predmety nedostali do kontaktu s koncovkami batérie a aby nedošlo ku skratovaniu batérií.

Epilácia s epilátorom na dôkladnú epiláciu

Epilátor na dôkladnú epiláciu používajte na podpazušie, oblasť bikín, vrchnú peru, bradu a ťažko dostupné miesta.

- 1** Oblasť, ktorú chcete epilovať, dôkladne umyte. Odstráňte zvyšky dezodorantu, krému a pod. a potom oblasť jemnými dotykmi osušte.

- 2** Zapnite zariadenie.

- 3** Epilačnú hlavu priložte na pokožku pod uhlom 90°, aby vypínač smeroval na miesta, kam sa budete so zariadením pohybovať.

Poznámka: Voľnou rukou vždy napínajte pokožku.

- 4** Pri epilácii oblasti bikín alebo podpazušia pohybujte zariadením po pokožke pomaly proti smeru rastu chĺpkov.

- Oblasť bikín epilujte spôsobom znázorneným na obrázku (Obr. 11).
- Podpazušie epilujte spôsobom znázorneným na obrázku. Zdvihnite ruku, aby sa pokožka napla. Epilátorom pohybujte rôznymi smermi, aby ste zachytili všetky chĺpky (Obr. 12).

- 5** Ak chcete epilovať oblasť okolo úst (horná pera a brada), postupujte nasledovne.

Tip: Oblasť okolo úst vám odporúčame epilovať každú noc pred spaním, aby sa podráždené miesta a prípadné body krvácania cez noc stratili. Keď epilujete oblasť okolo úst prvých niekoľko krát, môže bežne dôjsť k

podráždeniu pokožky alebo miernemu krvácaniu (drobné poranenia), pretože pokožka na týchto miestach je veľmi citlivá.

- Epilátor položte pri 90-stupňovom uhle na pokožku a pomaly ním pohybujte po pokožke proti smeru rastu vlasov (Obr. 13).

Poznámka: Aby bola epilácia čo najpríjemnejšia, napnite pokožku okolo úst pomocou voľnej ruky. Epilátor na pokožku príliš nepritláčajte. Zariadením pohybujte po pokožke pomaly proti smeru rastu chĺpkov.

- Epilátorom môžete pohybovať rôznymi smermi, aby ste zachytili všetky chĺpky (Obr. 14).

Tip: Odporúčame Vám, aby ste okamžite alebo niekoľko hodín po epilácii (v závislosti od toho, čo viac vyhovuje Vašej pokožke) naniesli na pokožku hydratačný krém, aby sa uvoľnila.

Toto zariadenie nepoužívajte na odstraňovanie chĺpkov, ktoré rastú na materských znamienkach.

Zariadenie nepoužívajte na epiláciu mihalníc ani obočia.

Používanie pinzety Smart Tweezers

Tento epilátor je vybavený pinzetou Smart Tweezers s integrovaným svetlom, ktorá zjednodušuje odstraňovanie chĺpkov na tvári, ako napríklad obočia. Pinzeta Smart Tweezers je uložená v puzdre s integrovaným zrkadlom, ktoré Vám umožňuje odstraňovať chĺpky kdekoľvek a kedykoľvek. Pinzeta Smart Tweezers sa dodáva pripravená na používanie s 3 gombíkovými batériami vloženými v priečniku na batérie.

Používanie pinzety Smart Tweezers

- 1** Obočie si očistite čistiacou vodou na pleť alebo alkoholom, aby ste predišli vyklznutiu chĺpkov z ramien pinzety.
- 2** Pred vytrhávaním chĺpkov si pokožku zjemnite teplým uterákom na tvár. Týmto spôsobom sa odstraňovanie chĺpkov zjednoduší.
- 3** Obočie prečesťe v smere rastu chĺpkov.

- 4 Ceruzkou na oči si naznačte požadovaný tvar obočia. Odstráňte všetky chĺpky mimo vyznačenej oblasti.
- 5 Svetlo zapnite jedným stlačením vypínača.
- 6 Chĺpky vytáhnite vždy v smere rastu.

Poznámka: Chĺpky vytáhnite jeden po druhom.

Pinzetu Smart Tweezers nepoužívajte na chĺpky, ktoré rastú z materských znamienok.

Svetlom pinzety Smart Tweezers nesviette priamo do očí ani sebe, ani nikomu inému.

Výmena batérií

- 1 Mincou otočte veko priečinka na batérie a svetlo proti smeru pohybu hodinových ručičiek a priečinkov otvorte (Obr. 15).
 - 2 Vyberte staré gombíkové batérie.
- Gombíkové batérie skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Gombíkové batérie predstavujú potenciálne riziko udusenía.
- 3 Nové gombíkové batérie vložte do priečinka na batérie a svetlo stranou so záporným pólom smerom dopredu (Obr. 16).

Poznámka: Pinzeta Smart Tweezers sa napája tromi alkalickými gombíkovými batériami typu L736H alebo AG3 (priemer 7,8 x 3,4 mm).

- 4 Otáčaním mince v smere pohybu hodinových ručičiek upevnite veko na priečinkov na batérie a svetlo (Obr. 17).

Čistenie a údržba

Čistenie epilátora

Poznámka: Po každom použití epilátor očistite.

Poznámka: Pred začatím čistenia sa presvedčte, či je epilátor vypnutý a odpojený od siete.

Na čistenie epilátora nikdy nepoužívajte drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

Epilátor ani adaptér nikdy neoplachujte pod tečúcou vodou (Obr. 18).

Epilátor a adaptér udržiavajte v suchu (Obr. 19).

Čistenie epilačnej hlavy

- 1** Zatlačte epilačnú hlavu v smere šípok na zadnej strane zariadenia (1) a demontujte ju zo zariadenia (2) (Obr. 20).
- 2** Epilačnú hlavu v pohybe oplachujte 5 – 10 sekúnd pod tečúcou vodou.
- 3** Silno zatraste epilačnou hlavou (Obr. 21).
- 4** Epilačnú hlavu dôkladne osušte pomocou utierky na riad.

Poznámka: Pred vložením epilačnej hlavy späť do zariadenia sa uistite, že je úplne suchá.

Poznámka: Pomocou príbalenej kefky môžete tiež čistiť epilačnú hlavu. Počas čistenia kefkou prstom otáčajte epilačné disky (Obr. 22).

Čistenie epilátora na dôkladnú epiláciu

Epilátor na dôkladnú epiláciu nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny ani ho neoplachujte tečúcou vodou (Obr. 23).

- 1** Epilátor na dôkladnú epiláciu pravidelne čistite pomocou čistiacej kefky na odstránenie uvoľnených chĺpkov. Počas čistenia kefkou zariadenie nezapínajte (Obr. 24).
- 2** Zariadenie očistite suchou tkaninou.

Výmena

Epilátor

Všetky súčiastky zariadenia je možné vymeniť. Ak potrebujete niektorú z nich vymeniť, obráťte sa na predajcu značky Philips alebo na autorizované servisné stredisko spoločnosti Philips.

Epilátor na dôkladnú epiláciu

Kryt priečinka na batérie je možné vymeniť. Ak ho potrebujete vymeniť, obráťte sa na predajcu značky Philips alebo na autorizované servisné stredisko spoločnosti Philips.

Životné prostredie


















- Zariadenia na konci životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ich odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 25).



Epilátor na dôkladnú epiláciu a pinzeta Smart Tweezers

- Nenabíjateľné batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Nenabíjateľné batérie neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale zaneste ich na miesto oficiálneho zberu. Pred likvidáciou zariadenia vždy vyberte nenabíjateľné batérie a zariadenie odovzdajte na mieste oficiálneho zberu (epilátor na dôkladnú epiláciu) alebo ho zlikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom (pinzeta Smart Tweezers) (Obr. 26).

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo ak máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, **www.philips.com** alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

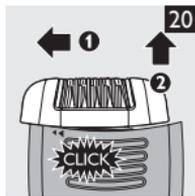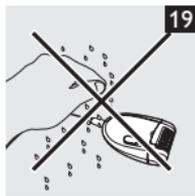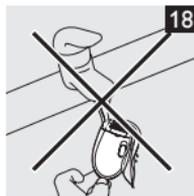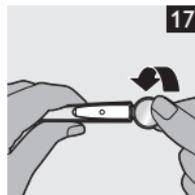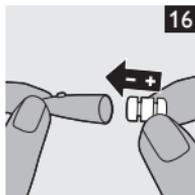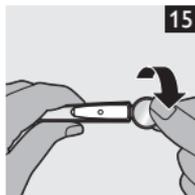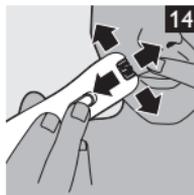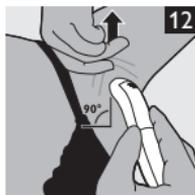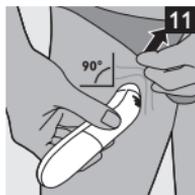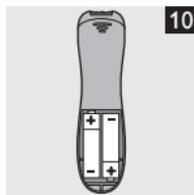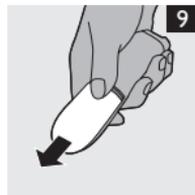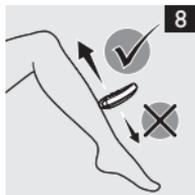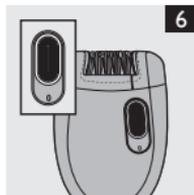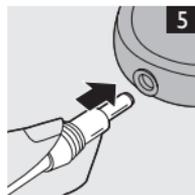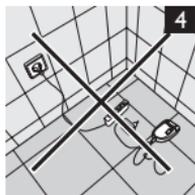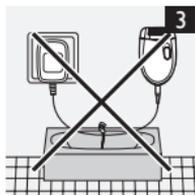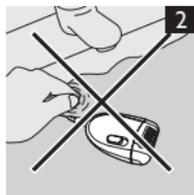

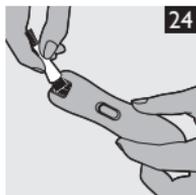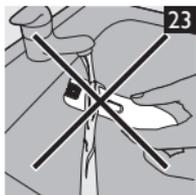



www.philips.com



4203.000.6727.1