

Panasonic®

Operating Instructions (Household) IPL Hair Removal System Model No. ES-WH90

| | |
|-------------------------|-----------|
| English | 3 |
| Русский | 21 |
| Українська | 41 |
| Қазақша | 61 |



Содержание

| | | | |
|---|-----------|---|----|
| Указания по технике безопасности..... | 22 | Использование..... | 32 |
| Использование по назначению..... | 27 | Для здоровой кожи..... | 33 |
| Описание..... | 28 | Индикаторы | 34 |
| Обрабатываемые участки..... | 29 | Очистка | 35 |
| Инструкции по частоте и продолжительности обработки | 29 | Вопросы и ответы | 35 |
| Зарядка | 30 | Устранение неисправностей..... | 37 |
| Перед началом эксплуатации..... | 31 | Срок службы батареи | 37 |
| При первом использовании прибора... 31 | | Извлечение встроенных аккумуляторов... 38 | |
| | | Технические характеристики | 38 |

Благодарим вас за приобретение продукта Panasonic.

Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните их для дальнейшего использования.

Указания по технике безопасности

Чтобы уменьшить риск получения травм, гибели людей, поражения электрическим током, пожара и повреждения имущества, всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Пояснения к символам

Следующие символы используются для классификации и описания уровня опасности, травм и материального ущерба, которые возникнут при игнорировании указаний и ненадлежащем использовании продукта.



ОПАСНОСТЬ

Обозначает потенциальную опасность, которая приведет к серьезным травмам или смерти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает потенциальную опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти.



ВНИМАНИЕ

Обозначает опасность, которая может привести к незначительным травмам или порче имущества.

Для классификации и описания типов инструкций, которым необходимо следовать, используются следующие символы.



Этот символ используется для предупреждения пользователей о конкретном способе эксплуатации, который запрещено применять.



Этот символ используется для предупреждения пользователей о конкретной процедуре, которой необходимо следовать для безопасной эксплуатации прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

► Предотвращение проблем с кожей и здоровьем



Лица, использующие имплантированные медицинские приборы, такие как кардиостимулятор, не должны касаться данным устройством кожи в месте имплантации электронного медицинского прибора.

- Это может привести к несчастному случаю или заболеванию.



Не используйте во время беременности или менструации.

- Это может привести к проблемам с кожей вследствие неустойчивого гормонального баланса.



Не используйте на татуировках.

- Это может привести к образованию ожоговых рубцов вследствие ожогов, покраснению кожи или появлению сыпи.



Не светите прямо в глаза.

- Это может привести к повреждению глаз.



Используйте только для подмышечных впадин, рук, ног, зоны бикини или лица (при использовании насадки для лица).

- Невыполнение этого требования может привести к ожогам, покраснению кожи или появлению сыпи.

► Питание




Не подключайте и не отключайте адаптер от бытовой розетки мокрыми руками.


- Это может привести к поражению электрическим током или травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Запрещается повреждать или изменять, сильно гнуть, тянуть или крутить сетевой шнур. Кроме того, не ставьте ничего тяжелого на сетевой шнур и не передавливайте его.

 **Никогда не используйте прибор, если адаптер переменного тока поврежден или если сетевая вилка слишком свободно входит в бытовую розетку.**

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.


 **Не используйте ничего, кроме прилагаемого адаптера переменного тока. Кроме того, не заряжайте какие-либо другие приборы с помощью прилагаемого адаптера переменного тока.**

- Это может привести к ожогам или пожару вследствие короткого замыкания.


 **Не используйте в случае превышения номинальной нагрузки в бытовой розетке или электропроводке.**


- Превышение номинальной нагрузки при подключении слишком большого количества штепселей в одну бытовую розетку может привести к пожару из-за перегрева.

Обязательно убедитесь в том, что прибор работает от источника электропитания, соответствующего его номинальному напряжению, указанному на адаптере переменного тока.

 **Полностью вставьте адаптер или разъем для подключения питания к прибору.**


- Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.


 **Всегда отключайте адаптер от бытовой розетки при чистке.**
- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травмам.


 **Регулярно очищайте сетевую вилку и разъем для подключения питания к прибору с целью предотвращения накопления пыли.**

- Невыполнение этого требования может привести к возгоранию из-за повреждения изоляции из-за влажности.
Отключите адаптер и протрите сухой тряпкой.


► Данное изделие

 **Данный продукт оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не подвергайте воздействию огня или высоких температур. Запрещается заряжать, использовать или оставлять при высоких температурах.**
- Это может привести к перегреву, воспламенению или взрыву.

 **Не храните в местах, доступных для детей. Не позволяйте им пользоваться прибором.**
- Это может привести к несчастному случаю или травме.

 **Не вносите изменений и не ремонтируйте.**
- Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта (замены батареи и т.д.).

 **Никогда не разбирайте прибор, за исключением случаев, когда он подвергается утилизации.**
- Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

 **Не используйте, если заблокировано вентиляционное отверстие.**
- Это может привести к пожару или ожогам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

► Корпус и адаптер переменного тока

Не храните корпус и адаптер переменного тока в ванной комнате или месте с высоким уровнем влажности. Также не оставляйте в таких местах, где на прибор может попасть вода (например, на туалетном столике).

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару.

Не погружайте корпус и адаптер переменного тока в воду и не мойте их водой.

Не используйте корпус и адаптер переменного тока в ванной комнате или месте с высоким уровнем влажности.

- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.

Берегите прибор от попадания влаги.

► В случае неправильной работы или неисправности

Немедленно прекратите использование и отключите адаптер, если возник сбой или какие-либо неисправности.

- Использование его в таких условиях может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

<Причины сбоев и неисправностей>

• Корпус, адаптер или сетевой шнур деформирован или чрезмерно горячий.

• Корпус, адаптер или сетевой шнур пахнет гарью.

• Возникает необычный звук, исходящий от корпуса, адаптера или сетевого шнура во время работы или зарядки.

- Обратитесь за проверкой или ремонтом в авторизованный сервисный центр.

► Также соблюдайте следующие меры предосторожности

Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность.

Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

- Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.

Шнур электропитания не может быть заменен. Если шнур электропитания поврежден, адаптер переменного тока следует выбросить.

- Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.

ВНИМАНИЕ

► Защита кожи

Следующие лица не должны использовать этот прибор:

- Страдающие дерматитом
- Страдающие atopическим дерматитом или сыпью и другими кожными заболеваниями
- Страдающие аллергическим диатезом или с чувствительной кожей, которая легко раздражается от косметики, одежды, металлов и т.д.
- С кожей, чувствительной к воздействию солнечного света

Не используйте на следующих участках тела:

- На загорелой коже
- На темно-коричневых или черных участках кожи, таких как родинки

(См. лист “Возможные цвета волос и кожи”.)


- На струпьях, травмах, сыпи, синяках, бородавках, прыщах, раке кожи, стригущем лишае (дерматомикозе), фолликулите, раздраженной коже, укусах насекомых и т.д.
- На ангиоме
- На участках, где применялась косметическая хирургия


Не используйте в следующих случаях:


- Если вы нехорошо себя чувствуете или чувствуете, что что-то не так с вашей кожей или телом


Не используйте повторно на одном участке. (Старайтесь использовать прибор не чаще одного раза в каждые 3 дня, даже если удаление нежелательных волос не сразу становится очевидным.)


- Это может привести к травмам кожи, воспалению, кровотечению, усилению боли или другим проблемам, либо к ухудшению имеющихся симптомов.


 **Не снимайте насадку, кроме как во время чистки.**
- Это может привести к травме кожи или пальцев.

 **Допускается использование только лицами старше 18 лет.**
- Невыполнение этого требования может привести к травме или воспалению кожи, кровотечению или усилению боли.

 **Перед началом эксплуатации убедитесь, что на световоде и окне излучателя нет деформаций, трещин или повреждений.**
- Невыполнение этого требования может привести к травмам кожи.

 **Лица, принимающие медицинские препараты, должны проконсультироваться с дерматологом.**
- В зависимости от типа принимаемого медицинского препарата кожа может быть чувствительна к стимуляции светом, что может привести к проблемам с кожей.

 **В случае воспаления (например, при покраснении кожи) прекратите пользоваться прибором, и обратитесь к дерматологу, если через 2 дня воспаление не проходит.**
- Невыполнение этого требования может привести к ухудшению симптомов.

 **Перед началом эксплуатации снимите металлические объекты, такие как аксессуары.**
- Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.

► Питание

 **Не допускайте, чтобы металлические объекты или мусор прилипали к сетевой вилке или разъему для подключения питания к прибору.**
- Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.



ВНИМАНИЕ



Не наматывайте сетевой шнур вокруг адаптера во время хранения.

- Это может привести к излому шнура под нагрузкой, и, как следствие, к пожару по причине короткого замыкания.



При отключении адаптера или разъема для подключения питания к прибору держитесь за них, а не за сетевой шнур.

- Отключение, держась за сетевой шнур, может привести к поражению электрическим током или травме.



Отключите адаптер от бытовой розетки, когда прибор не заряжается.

- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару из-за утечки тока в результате износа изоляции.

▶ Данное изделие



Не использовать на мокрой коже.

- Это может привести к поражению электрическим током.



Не роняйте и не подвергайте ударам.

- Это может привести к травмам.



Не снимайте насадку и не касайтесь окна излучателя сразу после использования функции фотоэпиляции.

- Это может привести к ожогам, поскольку окно излучателя сильно нагревается.

▶ Соблюдайте следующие меры предосторожности



Не используйте на одежде или волосах на голове.

- Это может привести к ожогам или обесцвечиванию.

Обращение с извлеченным аккумулятором при утилизации



ОПАСНОСТЬ

Аккумулятор предназначен исключительно для использования с этим прибором. Не используйте аккумулятор с другими устройствами.

Не заряжайте аккумулятор после того, как он был вынут из устройства.

- Не бросайте в огонь и не нагревайте.
 - Не ударяйте, не разбирайте, не модифицируйте и не прокалывайте.
 - Не позволяйте положительным и отрицательным клеммам аккумулятора входить в контакт друг с другом через металлические предметы.
 - Не переносите и не храните аккумулятор вместе с металлическими украшениями, такими как цепочки, заколки.
 - Не используйте и не оставляйте аккумулятор там, где он будет подвергаться воздействию высоких температур, например, под прямыми солнечными лучами или вблизи других источников тепла.
 - Никогда не нарушайте изоляцию аккумулятора.
- Это может привести к перегреву, воспламенению или взрыву.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После снятия аккумулятора держите его в месте, недоступном для детей.



- Аккумулятор может нанести вред организму при случайном проглатывании.

Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При протечке аккумуляторной жидкости не прикасайтесь к аккумулятору голыми руками.

- Аккумуляторная жидкость может привести к слепоте при попадании в глаза.



Не трите глаза. Немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу.

- При попадании на кожу или одежду аккумуляторная жидкость может вызвать воспаления или травмы.

Тщательно смойте ее чистой водой и обратитесь к врачу.

Использование по назначению

- Прежде чем приступать к фотоэпиляции, выполните следующие действия.
 - Данный прибор необходимо использовать только на голой коже без нанесения косметических средств, лосьонов и т.д. Если используется лосьон или средство для бритья (гель и т. д.), тщательно смойте средство водой и дайте коже высохнуть.
 - Обязательно побрите обрабатываемый участок кожи (на теле или лице).


Перед использованием вытрите воду или пот с обрабатываемого участка и уберите прилипшие к коже волосы.

Если на коже останутся волосы или средство для бритья, это может привести к загрязнению световода. В результате может усложниться чистка световода.

- Не используйте для чистки прибора спирт, жидкость для снятия лака или моющее средство (например, жидкое мыло для рук) и т.д. Это может привести к поломке, растрескиванию или обесцвечиванию корпуса. Протирайте сухой тканью.
- Не оставляйте прибор в местах с высокой температурой. Это может привести к неисправности.
- Данный символ означает, что для подключения этого электроприбора к сети питания требуется специальный отсоединяемый блок питания. Обозначение типа блока питания приводится рядом с символом.



Описание

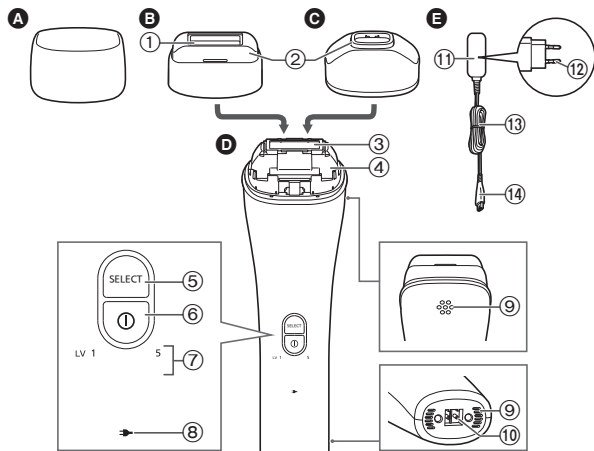


- A** Крышечка
- B** Насадка для тела
- C** Насадка для лица
- ① Световод
- ② Переключатель излучения
- D** Корпус
- ③ Окно излучателя
- ④ Лампа излучателя
- ⑤ Переключатель выбора уровня (мигает)
- ⑥ Переключатель питания
- ⑦ Индикатор уровня (синий) (мигает) (См. стр. 31 и 34.)
- ⑧ Индикатор зарядки/уведомления (красный) (См. стр. 30 и 34.)
- ⑨ Вентиляционное отверстие
- ⑩ Гнездо для подключения зарядного устройства
- E** Адаптер переменного тока (RE7-87)
- ⑪ Адаптер
- ⑫ Сетевая вилка
- ⑬ Сетевой шнур
- ⑭ Разъем для подключения питания к прибору

Снятие и установка насадки для лица/тела

► Снятие насадки

Удерживая насадку по бокам, снимите ее с корпуса.

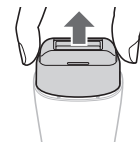

► Установка насадки

Надавите на насадку до щелчка.




Русский


Обрабатываемые участки

Лицо



- Не используйте в области , например, вокруг глаз, бровей, губ и т.д.
- Подвяжите волосы или зафиксируйте их с помощью ленты для поддержки волос и т.д. Также зафиксируйте короткие волосы заколками и т.д.
 - Постарайтесь не обгореть на солнце до и после применения на лице.
 - Не используйте для обработки мужской бороды.

Подмышечные впадины

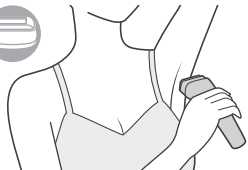


Руки



Зона бикини *1, 2



Ноги

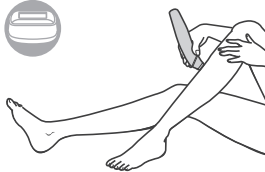

- *1 Прежде чем приступить к обработке зоны бикини, оденьте купальник, нижнее белье и т.п., чтобы определиться с обрабатываемым участком.
- *2 Не используйте в области живота и гениталий.

Инструкции по частоте и продолжительности обработки

Частота

Ноги/Руки

Используйте раз в 2 недели первые 2 месяца.
Используйте раз в 4 недели с 3-го месяца.

Подмышечные впадины/Зона бикини/Лицо

Используйте раз в неделю первые 2 месяца.
Используйте раз в 2 недели с 3-го месяца.

Инструкции по времени обработки

| | |
|---------------------|--|
| Ноги | Приблизительно 10 минут за один сеанс для обеих ног (приблизительно 190 импульсов) |
| Руки | Приблизительно 5 минут за один сеанс для обеих рук (приблизительно 90 импульсов) |
| Подмышечные впадины | Приблизительно 2 минуты за один сеанс для обеих подмышечных впадин (приблизительно 30 импульсов) |
| Зона бикини | Приблизительно 2 минуты за один сеанс (приблизительно 30 импульсов) |
| Лицо | Приблизительно 3 минуты за один сеанс (приблизительно 40 импульсов) |

- Обратите внимание, что для осветления лица рекомендуется использовать прибор один раз каждые 3 дня.
- Не используйте повторно на одном участке, даже если удаление нежелательных волос не сразу становится очевидным. Старайтесь использовать прибор не чаще одного раза в каждые 3 дня. (Эффект от обработки может отличаться в зависимости от области обработки или индивидуальных особенностей тела.)
- Если прибор некоторое время не использовался, продолжайте использовать с той же частотой, что и в первые 2 месяца.


- Длительность обработки зависит от места роста и количества волос, обрабатываемого участка и способа использования прибора.
- Сначала сбрейте на обрабатываемом участке все лишние волосы. Используйте отдельную бритву или электробритву.
- Данный прибор не обеспечивает перманентную эпиляцию. В случае прекращения использования прибора лишние волосы со временем отрастут.

Зарядка

Русский

1 Надежно вставьте разъем для подключения питания к прибору в гнездо для подключения зарядного устройства в нижней части корпуса.

2 Надежно подключите адаптер к электрической розетке.

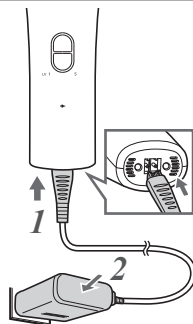

3 Убедитесь, что индикатор зарядки/уведомления горит.

| В процессе зарядки | После завершения зарядки |
|---|--|
|  Загорится красный индикатор. |  Красный индикатор гаснет. |

- Зарядка занимает около 3 часов.
- Время зарядки может отличаться в зависимости от зарядной емкости.

<Проверка завершения зарядки>

Нажмите переключатель питания при подключенном адаптере переменного тока. Индикатор зарядки/уведомления загорается и приблизительно через 5 секунд гаснет.

4 Выключите адаптер из электрической розетки и отсоедините разъем для подключения питания к прибору от корпуса.

(в целях безопасности и для уменьшения энергопотребления)

- Зарядка в течение 3 часов или дольше не нанесет вреда корпусу.

Примечания

- Время зарядки может отличаться, если прибор используется впервые или не использовался больше полугода или дольше. Индикатор на корпусе может не светиться в течение нескольких минут после начала зарядки, но он загорится, если зарядка продолжится.
- Полной зарядки прибора хватает на излучение приблизительно 600 импульсов.
- Количество импульсов зависит от температуры воздуха и способа использования прибора.
- Рекомендованная температура воздуха во время зарядки составляет 15 °C - 35 °C. Если температура воздуха не соответствует рекомендованной, зарядка может быть невозможна.
- Если во время зарядки из радиоприемников и других устройств доносится шум помех, зарядяйте прибор от другой электрической розетки.
- Зарядка прибора после каждого использования не влияет на срок службы аккумулятора.

Перед началом эксплуатации

- Не используйте прибор в темном помещении. Закрывайте глаза при фотоэпиляции лица с использованием насадки для лица. Это может привести к временному раздражению глаз.
- Данный прибор необходимо использовать только на голый коже без нанесения косметических средств, лосьонов и т.д. Если используется лосьон или средство для бритья (гель и т. д.), тщательно смойте средство водой и дайте коже высохнуть.
- Обязательно побрите обрабатываемый участок кожи (на теле или лице).
Перед использованием вытрите воду или пот с обрабатываемого участка и уберите прилипшие к коже волосы. Если на коже останутся волосы или средство для бритья, это может привести к загрязнению световода. В результате может усложниться чистка световода.

При первом использовании прибора

Убедитесь, что уровень мощности подходит вашей коже. В зависимости от телосложения и состояния здоровья человека, использующего прибор, обработанная кожа может временно покраснеть или болеть.

Установите уровень мощности 1 (LV1) и обработайте участок одним импульсом.

Через 2 дня ↓ Если кожа в порядке


Установите уровень мощности 1 (LV1) и начните обрабатывать требуемый участок.

- Инструкции по частоте и продолжительности обработки (См. стр. 29.)

Через 2 недели* ↓ Если кожа в порядке
*Для подмышечных впадин/зоны бикини/лица: через 1 неделю

Если требуется увеличить уровень мощности, обработайте участок одним импульсом, после чего в течение приблизительно 2-х дней следите за состоянием кожи. Повышайте мощность излучения на один шаг за раз.


- Если через 2 дня или больше наблюдается сильная боль или покраснение, прекратите пользоваться прибором и обратитесь к дерматологу.

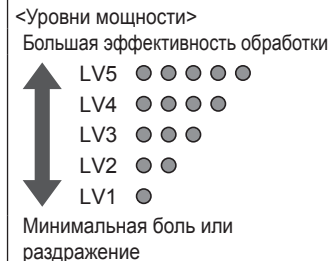

Использование

- Питание не включается даже после нажатия выключателя и после подключения адаптера переменного тока к корпусу.
- Прибор может не работать при температуре окружающей среды примерно 5 °C или ниже.

1 Снимите крышечку.

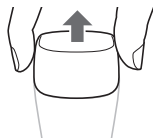

2 Наденьте насадку, которая соответствует обрабатываемой области.

3 Нажмите и удерживайте (приблизительно 3 секунды) , чтобы включить питание.

- Если прибор не используется приблизительно 1 минуту, питание автоматически выключается.


4 Нажмите , чтобы выбрать уровень мощности.

- При включении питания выбран уровень 1.
- Уровень переключается циклически в последовательности 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1 при нажатии переключателя выбора уровня.
- Индикатор уровня мигает, а затем включается. (Раздается звуковой сигнал готовности к импульсу.)

5 После того, как загорится индикатор уровня, нажмите переключатель излучения к коже и держите до излучения импульса.

После того как прибор подаст звуковой сигнал, нажмите головку перпендикулярно к коже.

- Не нажимайте слишком сильно.
- Прежде чем использовать прибор убедитесь, что поблизости нет других людей.
- При излучении в обрабатываемой области может излучаться свет из вентиляционного отверстия в задней части корпуса; это не должно вызывать каких-либо проблем.
- Инструкции по фотоэпиляции (См. стр. 33.)
- После того как прибор подаст звуковой сигнал, подготовка к импульсу завершена.

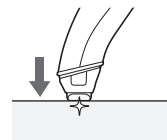


6 Нажмите , чтобы выключить питание.

Инструкции по надлежащей фотоэпиляции

Инструкция 1

Прижмите переключатель излучения перпендикулярно к коже и держите его в таком положении.

Из окна излучателя не будет излучаться импульсы, если прибор не прижат к коже перпендикулярно.

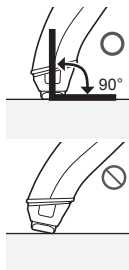

Инструкция 2

Размер области  служит ориентиром для определения области фотоэпиляции при каждом импульсе.

a




b



a) Насадка для тела


b) Насадка для лица

• После того как прибор подаст звуковой сигнал, подготовка к импульсу завершена.

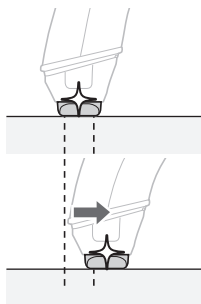

Серия импульсов

После одного импульса переместите прибор к следующему участку, удерживая прибор прижатым к коже. Допускается излучение до 10 импульсов с интервалом приблизительно 3 секунды.

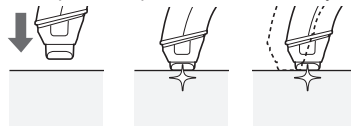

- После 10 импульсов окно излучателя перестанет излучать импульсы. Уберите прибор от кожи и повторите.
- Не используйте прибор повторно на одном участке.
- В зависимости от условий эксплуатации интервал импульсов может отличаться.

Для здоровой кожи





После фотоэпиляции рекомендуется следующий уход для кожи.

1. Охладите кожу при помощи полотенца, смоченного в ледяной воде.
2. Увлажните кожу при помощи лосьона и т.п.





Индикаторы



► Обычная индикация

| | |
|---|---|
|  | Индикатор уровня (синий) мигает (один раз в секунду). На изображении слева выбран 5 уровень. |
|  | Выполняется подготовка к импульсу. |
|  | Индикатор уровня (синий) горит. На изображении слева выбран 5 уровень. |
|  | Устройство готово к излучению импульса. |

► Уведомление о зарядке

| | |
|---|--|
|  | Индикатор зарядки/уведомления (красный) мигает (один раз в секунду). |
|  | Низкий заряд аккумулятора. Рекомендуется выполнить зарядку. |

► Отображение неисправности

| | |
|---|---|
|  | [Проблемы с зарядкой] Индикатор зарядки/уведомления (красный) быстро мигает (два раза в секунду). |
|  | Рекомендованная температура воздуха во время зарядки составляет 15 °С - 35 °С. Проверьте температуру воздуха в помещении, где выполняется зарядка прибора, и повторите зарядку. |

[Другие неисправности]

Индикатор уровня (синий) и индикатор зарядки/уведомления (красный) мигают одновременно (один раз в секунду), прибор подает два звуковых сигнала и через 5 секунд выключается питание.

Прибор может не работать при температуре окружающей среды примерно 5 °С или ниже. Проверьте температуру воздуха в помещении, где будет использоваться прибор, и включите его снова.


(Прибор может не сразу адаптироваться к температуре воздуха после смены места.) Если проблема повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Очистка

Прежде чем чистить, обязательно выключите питание и подождите 2-3 минуты.

► Окно излучателя/Световод

1. Снимите насадку.

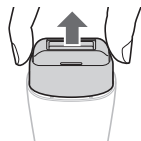

2. Тщательно вытрите грязь сухой тканью.

Окно излучателя



Световод



3. Наденьте насадку.
Вставьте до щелчка.



► Вентиляционное отверстие

Вытрите грязь сухой тканью.



Вопросы и ответы

| Вопрос | Ответ |
|---|--|
| Свет какого типа излучается из окна излучателя? | ► Мгновенная вспышка ксеноновой лампы. |
| Почему этим прибором могут пользоваться только лица, старше 18 лет? | ► Это связано с неустойчивым гормональным балансом при взрослении и высокой чувствительностью кожи. |
| На каких участках можно применять прибор? | ► Используйте прибор только для подмышечных впадин, рук, ног, зоны бикини или лица (при использовании насадки для лица). (Не используйте насадку для тела на лице или других участках). |
| Можно ли использовать прибор каждый день? | ► Использовать прибор каждый день на одном участке не рекомендуется. ► Соблюдайте инструкции по частоте и продолжительности обработки. (См. стр. 29.) |
| Почему после импульса чувствуется запах гари? | ► Это связано с воздействием тепла, излучаемого во время импульса, на оставшиеся волосы, и не является следствием неисправности. Сбрейте волосы, если они отросли слишком сильно. Также удаляйте с кожи обрезки волос. |

Русский



| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Свет, излучаемый при использовании прибора, кажется очень ярким. Это нормально? | <p>Прижимайте переключатель излучения вплотную к коже. (См. стр. 33.)</p> <p>▶ Если свет все еще мешает, воспользуйтесь солнцезащитными очками или другими средствами защиты глаз.</p> |
| Можно ли заменить лампу излучателя? | <p>Лампа излучателя замене не подлежит.</p> <p>▶ Если лампа излучателя повреждена или имеет какой-либо дефект, обратитесь в магазин, где был приобретен прибор, или в авторизованный сервисный центр Panasonic для ремонта.</p> |

| Вопрос | Ответ |
|--|--|
| Свет, излучаемый при использовании прибора, кажется горячим. Это нормально? | <p>▶ Ощущения разнятся в зависимости от человека, но если на коже остались волосы, температура может казаться более высокой.</p> |
| При использовании прибора обработанная кожа краснеет. Это нормально? | <p>▶ В зависимости от телосложения и состояния здоровья человека, использующего прибор, обработанная кожа может временно покраснеть или болеть. Немедленно прекратите пользоваться прибором, после чего охладите и увлажните кожу.</p> |
| После использования боль и покраснение не проходят, это нормально? | <p>▶ Если в течение 2-х дней симптомы проходят, продолжайте пользоваться прибором на таком уровне, чтобы эти симптомы не появлялись. Если после 2-х дней симптомы не проходят, обращайтесь к дерматологу. (См. стр. 31.)</p> |
| Уменьшается ли мощность излучения при уменьшении заряда аккумулятора (индикатор зарядки/уведомления мигает)? | <p>▶ Независимо от оставшейся емкости аккумулятора, мощность излучения остается постоянной.</p> |
| Могут ли мужчины пользоваться прибором? | <p>▶ Мужчины могут использовать прибор, кроме области бороды, но стимуляция кожи может быть сильнее из-за того что у мужчин, по сравнению с женщинами, как правило, на теле больше волос и они толще.</p> |

| Вопрос | Ответ |
|--|--|
| Не удается очистить грязь со светодиода. | <p>Если не удается очистить грязь даже после очистки, обратитесь в магазин, где был приобретен прибор, или в авторизованный сервисный центр Panasonic для ремонта.</p> <p>[Запасная деталь] Насадка для тела: WESWH90W3108</p> |

Устранение неисправностей

| Проблема | Действия |
|---|---|
| Из окна излучателя не излучаются импульсы. | <p>Убедитесь, что индикатор уровня (синий) перестал мигать и горит постоянно.</p> <p>Прижмите переключатель излучения перпендикулярно к коже до подачи импульса. (См. стр. 33.)</p> <p>После излучения серии из 10 импульсов временно уберите прибор от кожи.</p> |
| Подготовка к импульсу занимает много времени. | <p>Подготовка к импульсу может занимать больше времени для предотвращения перегрева корпуса.</p> |
| Питание выключилось, после того как мигнули все индикаторы и прибор подал два звуковых сигнала. | <p>Прибор может не работать при температуре окружающей среды примерно 5 °C или ниже. (См. стр. 34.)</p> |

| Проблема | Действия |
|---|---|
| Во время работы выключилось питание. | <p>В целях безопасности питание прибора автоматически выключается, если он не используется приблизительно 1 минуту после включения. Снова включите питание.</p> |
| После зарядки прибор можно использовать только несколько раз. | <p>Срок службы аккумулятора закончился. (См. на этой стр.)</p> |
| После нажатия переключателя питания прибор не включается. | <p>Для включения питания нажмите и удерживайте переключатель питания (приблизительно 3 секунды).</p> <p>Зарядите прибор. (См. стр. 30.)</p> |

Если проблему решить не удастся, обратитесь в магазин, где был приобретен данный прибор, или в авторизованный сервисный центр Panasonic для ремонта.

Срок службы батареи

Приблизительно 3 года.

Если время работы оказывается очень коротким даже после полной зарядки, срок службы аккумулятора закончился. (Срок службы аккумулятора зависит от условий использования и хранения.)

Аккумулятор данного прибора не предназначен для самостоятельной замены пользователем. Замена аккумулятора должна выполняться в авторизованном сервисном центре.


Извлечение встроенных аккумуляторов

Перед утилизацией прибора удалите из него аккумуляторы.

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация батарей была выполнена в официальном пункте приема, при наличии такового в вашем городе.

Данный рисунок предназначен для использования только при утилизации прибора, а не для ремонта. Если вы разберете прибор самостоятельно, это может привести к неисправности.

- Отсоедините прибор от адаптера переменного тока.
- Если прибор включается и излучает свет, используйте до полной разрядки аккумулятора.
- Подождите не меньше 10 минут после выключения питания, и только потом разбирайте прибор.
- Выполните шаги с ① по ⑦, приподнимите и удалите батарею.
- Избегайте короткого замыкания между положительной и отрицательной клеммами извлеченного аккумулятора, изолируя клеммы при помощи клейкой ленты.

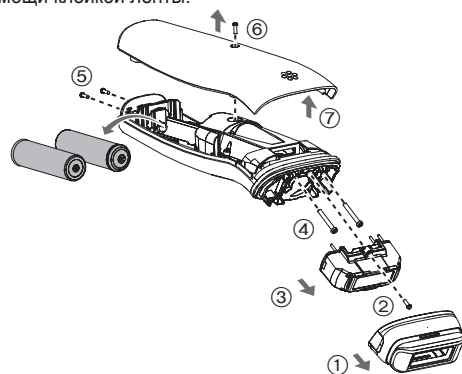

Рекомендации по охране окружающей среды и переработке отходов

Данный прибор содержит литий-ионный аккумулятор.

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация аккумуляторов была выполнена в официальном пункте приема, при наличии такового в вашей стране.

Технические характеристики

| | |
|---------------|---|
| Питание | См. табличку номиналов на адаптере сети переменного тока. (автоматическое преобразование напряжения) |
| Время зарядки | Прибл. 3 часа |

Данное устройство предназначено только для домашнего использования.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



Панасоник Корпорэйшн


1006, Кадома, Осака 571-8501, Япония

Сделано в Японии

Примечание:

Дата изготовления устройства (год, месяц, день) указана в виде номера на изделии и адаптере переменного тока.

Номер: X XX XX

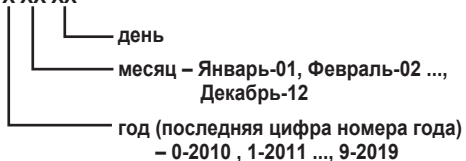

Русский

