

## ТВ-1583 Инструкция по эксплуатации

### Массажер для кожи лица

#### Инструкции по безопасности

Для обеспечения правильной работы прибора, пожалуйста внимательно прочтите все инструкции по безопасности перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования.

- ⚠ WARNING** Следующие лица не должны использовать этот прибор.

  - Дети
  - Беременные женщины
  - Лица, страдающие эпилепсией
  - Лица, имеющие опухоли или рак
  - Лица с электрокардиостимулятором

Проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием, если у вас есть какие-либо серьезные заболевания.


**⚠ WARNING** Не используйте прибор, если у вас есть воспаление глаз, такие как конъюнктивит. Не используйте прибор при использовании контактных линз.

**⚠ WARNING** Обратиться к специалисту, если ваши глаза, веки или кожа вокруг глаз ведут себя необычным образом при использовании прибора или вскоре после этого.
- ⚠ WARNING** Если массажная головка при контакте с вашей кожей вызывает жжение, используйте воду для охлаждения данной области.
- ⚠ WARNING** Не пытайтесь отремонтировать, разобрать или модифицировать прибор самостоятельно.
- ⚠ WARNING** Не держите прибор под водой, в горячей и влажной среде.
- ⚠ WARNING** Правильно распоряжайтесь упаковкой от прибора, держите пакет подальше от детей, чтобы предотвратить удушье.
- ⚠ WARNING** Этот прибор – не игрушка. Храните прибор в недоступном месте для детей моложе 12 лет.
- ⚠ CAUTION** Всегда проверяйте прибор, прежде чем использовать его. Не используйте прибор, если любая его часть повреждена или сломана, так как это может привести к травме.
- ⚠ CAUTION** Перед использованием прибора в первый раз или если у вас чувствительная кожа, пожалуйста, проверьте состояние вашей кожи и убедитесь, что нет никаких аномалий.

## Продукт

### 1. Спецификация

Наименование: Массажер для кожи лица  
Модель: ТВ-1583  
Напряжение: DC 1.5V  
Мощность: 0.9W  
Питание: 1 X AAA Battery 1.5V (Not Included)  
Размер: 137.2мм \*23мм \*25.2мм  
Материал: ABS  
Стандарт: Q/YYN1015-2015  
Патент NO.: 201530153674.0

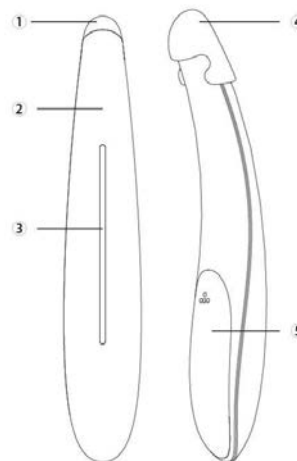

### 2. Описание продукта

- 1) Массажная головка
- 2) Основной корпус
- 3) Смарт-датчик
- 4) Защитный колпачок
- 5) Крышка батарейного отсека

### 3. Использование

#### 3.1. Подготовка к использованию


Для обеспечения надлежащего функционирования этого прибора, пожалуйста, прочитайте следующую инструкцию внимательно перед использованием:

- 1) Удерживайте основной корпус прибора так, чтобы ваши пальцы находились полностью в контакте со смарт-датчиком на задней стороне прибора. Когда массажная головка коснется вашей кожи, прибор автоматически включится. Когда массажная головка не касается вашей кожи, или ваша рука не полностью в контакте со смарт-датчиком, основной блок автоматически выключается.  
(Показано иже 3.1 - 1)



3.1-1

- 2) Смарт-датчик чувствителен к влажности кожи. Убедитесь, что ваши руки и прибор влажные.
- 3) Возьмите устройство, снимите крышку батарейного отсека в направлении стрелки.  
(Показано ниже 3.1-2)
- 4) Вставьте батарейки типа AAA, как показано на рис. (Батарея не входит в комплект).  
(Показано ниже 3.1-2)

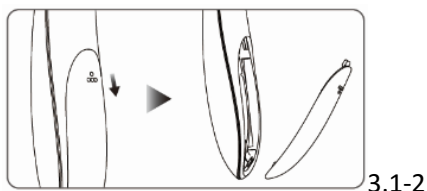

### 3.2. Использование прибора


- 1) Снимите защитный колпачок. Нанесите небольшое количество вашего косметического средства для ухода за кожей вокруг глаз.
- 2) Возьмите устройство, убедитесь, что ваши пальцы находятся полностью в контакте со смарт-датчиком на задней стороне корпуса. Перемещайте прибор в направлении стрелки, как показано на рисунке. Прибор начнет работать, мягко массируя кожу вокруг глаз. Выберите идеальный уровень давления, когда Массажная головка движется плавно, и кожа слегка вибрирует. (Показано как ниже 3.2 - 1)



- 3) Медленно перемещайте массажную головку в направлении стрелки. Идеальный уровень давления, когда Массажная головка движется плавно, и кожа слегка вибрирует.
  - a) Перемещайте массажер от центра лба к волосам в направлении стрелки. (Показано ниже 3.2-2)



- b) Перемещайте головку массажера от подбородка к скулам. (Показано ниже 3.2-3)

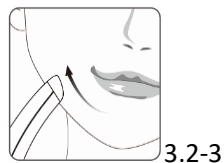

- c) Перемещайте массажную головку по линиям от носа в направлении ушей. (Показано ниже 3.2-4)



- 4) Очищайте головку массажера и закрывайте защитным колпачком после каждого использования.

### 3.3. Чистка и уход

Убедитесь, что прибор выключен, прежде чем приступить к очистке.

- 1) Протрите массажную головку и основной блок мягкой салфеткой или ватным тампоном смоченным водопроводной водой с мылом, а затем тщательно высушите перед возобновлением использования.
- 2) Не мойте прибор водой. Не используйте спирт, наждачную бумагу, металлическую мочалку, абразивные чистящие средства, бензин или эмаль для удаления загрязнений. Это может привести к неисправности, возникновению трещин или обесцвечиванию.

## Обслуживание

### 1. Экологические советы

Батареи содержат вредные для нашей окружающей среды вещества. Пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором, а сдайте в официальный пункт приема.

### 2. Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Одноразовые батареи разряжены.	Замените батареи на новые.
Прибор не работает должным образом.	Не хватает времени для массажа	Использовать прибор в течение длительного времени, как указано в инструкции.

### 3. Гарантия и Сервис

Если вам нужны сервисные услуги или информация, либо у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, посетите профессиональный веб-сайт [www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com) или свяжитесь с дистрибьютером.

Производитель: SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.

Адрес: PINGSHAN NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, P.R. CHINA

Copyright © TOUCHBeauty All Rights Reserved.

[www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com)