

# SUPRA



Руководство по эксплуатации  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ  
**MBS-112**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если массажер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## Содержание

Меры предосторожности.....	3
Комплектация.....	4
Назначение массажера.....	4
Преимущества массажера с функцией миостимуляции.....	4
Устройством массажера.....	5
Питание массажера.....	5
Эксплуатация массажера.....	5
Чистка и уход.....	6
Устранение неисправностей.....	7
Безопасная утилизация.....	7
Технические характеристики.....	7



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием массажера полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

Массажер предназначен для массаирования отдельных частей человеческого тела в домашних условиях. Запрещается использовать массажер в коммерческих целях.

Используйте прибор только по его прямому назначению таким образом, как указано в руководстве.

Запрещается разбирать и каким-либо образом изменять прибор.

Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Запрещается подвергать массажер и патчи для борьбы с жировыми отложениями воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности, пыли или агрессивных веществ. Следите, чтобы внутрь корпуса массажера не попадала вода.

В случае загрязнения протрите массажер сухой мягкой тканью.

Запрещается погружать массажер в воду или использовать для его чистки агрессивные вещества.

Запрещается полностью погружать патч в воду, в противном случае им уже невозможно будет пользоваться и нужно будет приобретать новый.

Запрещается мыть патч горячей водой или применять для его очистки какие-либо чистящие средства.

Храните массажер и патчи для борьбы с жировыми отложениями в недоступном для детей месте.

Запрещается пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении каких-либо неисправностей обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра производителя.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.



### ВНИМАНИЕ:

Патчи для борьбы с жировыми отложениями должны плотно прилегать к коже. Если во время процедуры массажа вы почувствовали себя плохо, ощущаете удары током или испытываете другие неприятные ощущения, немедленно прекратите использование массажера.

Запрещается использовать массажер при наличии следующих противопоказаний: использование кардиостимулятора или других электронных устройств медицинского назначения, искусственное сердце, онкологические заболевания, беременность, менструация, температура выше 38°C, кожная аллергия, кожные заболевания.

При наличии заболеваний сердца запрещается использовать массажер близко к сердцу.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Массажер
- Патчи для борьбы с жировыми отложениями
- Кабель USB
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

## НАЗНАЧЕНИЕ МАССАЖЕРА

Появление данной модели, использующей микроэлектронные волны для улучшения формы тела, стало хорошей новостью для тех, кто хочет иметь красивую и стройную фигуру, но ленится или не имеет времени для физических упражнений. Используйте массажер, чтобы избавиться от жировых отложений на талии и живота. В приборе используется надежный двигатель, он обладает привлекательным дизайном, отличается простотой в использовании и хранении.

Массажер с функцией миостимуляции представляет собой устройство для пассивной тренировки тела. Использование массажера в течение 20 минут позволяет согреться и даже пропотеть без физического напряжения и без существенных затрат времени. Кроме того, массажер можно использовать в любом месте и в любое время, что очень удобно.

Массажер может работать в трех режимах миостимуляции: режим непрерывной волновой стимуляции, режим импульсной волновой стимуляции и режим периодической волновой стимуляции, при этом каждый режим имеет девять уровней. В зависимости от выбранного режима автоматическая программа генерирует безопасные биологические импульсы различной частоты и интенсивности. Эти импульсы стимулируют двигательные

нервы человеческого организма, которые в свою очередь заставляют мышцы производить колебательные движения за счет быстрых сокращений. Колебательные движения вынуждают мышцы потреблять энергию и сжигать жир. В результате постоянного использования массажера жировые отложения устраняются и формируется стройное подтянутое тело.

Воздействие микроэлектронных волн не только позволяет убрать живот и бока, но также стимулирует работу пищеварительных органов и избавляет от проблемы запоров. Используйте массажер лежа или сидя, и вы с легкостью обретете стройное и здоровое тело. Применяйте массажер на тех областях, которыми вы особенно недовольны. Сначала кожа станет более упругой и подтянутой, затем окрепнут мышцы, улучшится кровообращение и лимфоток. В результате организм также избавится от распространенных в настоящее время болей в спине, шее и плечах.

## ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖЕРА

## С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

Не требуется чья-либо помощь, которая может сделать вас зависимым от кого-либо.

Имеется три режима миостимуляции, разработанных на основе новейших технологий.

Простота и удобство в эксплуатации, эргономичные кнопки управления.


Девять уровней настройки позволяют выбрать наиболее комфортный режим.

Массажер имеет функцию автоматического отключения: через 15 минут работы, а также через 20 минут нахождения в режиме ожидания прибор выключается автоматически.

Воздействие осуществляется по всем направлениям, у прибора нет каких-либо «мертвых зон».

Без каких-либо усилий с вашей стороны, только за счет массажа, улучшается форма тела.

## УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

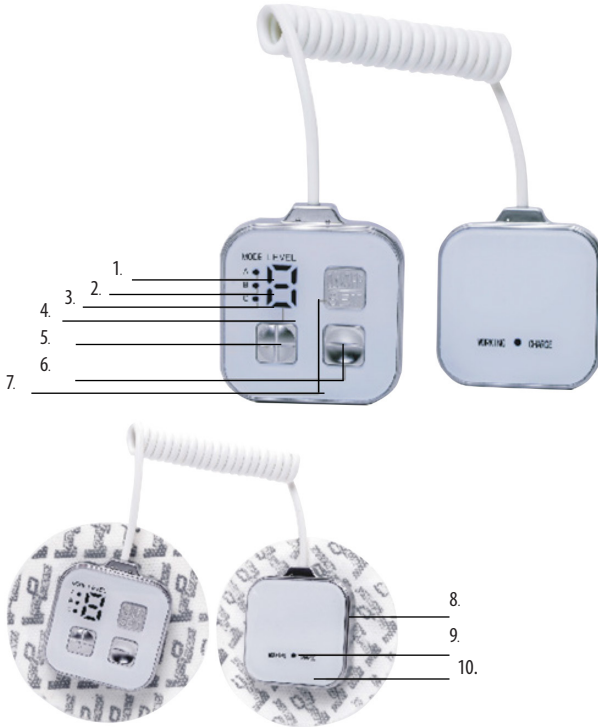

1. Индикатор А - соответствует режиму непрерывной волновой стимуляции
2. Индикатор В – соответствует режиму импульсной волновой стимуляции
3. Индикатор С – соответствует режиму периодической волновой стимуляции
4. Индикатор текущего уровня воздействия
5. +Кнопка увеличения уровня воздействия
6. - Кнопка уменьшения уровня воздействия
7. ON/OFF/SET Кнопка включения/выключения массажера / выбора режима работы
8. Патч для устранения жировых отложений (может использоваться 8-10 раз)
9. Индикатор питания/зарядки
10. Корпус массажера



## ПИТАНИЕ МАССАЖЕРА

Массажер питается от встроенной аккумуляторной батареи.

В начале эксплуатации массажера вы сможете зарядить встроенную батарею только после того, как она разрядится.

Чтобы зарядить батарею, подключите один конец кабеля USB, поставляемого в комплекте, к соответствующему разъему массажера, а другой конец кабеля USB – к USB порту компьютера.

Во время зарядки батареи индикатор зарядки мигает красным светом. Когда батарея полностью зарядится, индикатор погаснет.

### ВНИМАНИЕ:

Запрещается избыточно заряжать встроенную батарею. Как только индикатор зарядки погаснет, отсоедините массажер от компьютера.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Во время зарядки встроенной батареи прибором пользоваться нельзя.*

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖЕРА

### Подготовка к эксплуатации

Очистите те части тела, на которые вы хотите воздействовать. Кожа не должна быть масляной, на ней не должно быть каких-либо загрязнений. Перед процедурой массажа рекомендуется принять душ.

На каждом корпусе массажера с обратной стороны закрепите патчи для устранения жировых отложений. Если контакт достаточно плотный, должен раздаваться характерный звук.

Снимите с каждого патча защитную пленку. Приложите обе части массажера (патчами к телу) к тем частям тела, на которые вы хотите воздействовать. Убедитесь, что контакт между патчами и кожей плотный.

### Порядок работы

Нажмите кнопку ON/OFF/SET один раз, чтобы включить массажер. Загорится индикатор А, а также индикатор 1-го уровня. Массажер будет работать в режиме непрерывной волновой стимуляции на первом уровне.

Чтобы изменять режим работы массажера, последовательно нажимайте кнопку ON/OFF/SET, при этом индикаторы А, В, С будут загораться поочередно.

Чтобы изменять уровень воздействия, нажимайте кнопки +/-, соответственно будет изменяться индикация от 1 до 9. Чем выше уровень, тем большая сила тока используется во время массажа.

Через 15 минут работы массажер выключится автоматически. Если требуется выключить массажер раньше, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF/SET.

По окончании использования снимите патчи и прикрепите к ним защитную пленку. Уберите патчи и массажер в короб.

Через 30 минут после процедуры нанесите на кожу лосьон.

## Части тела, на которые можно воздействовать

### 1. Шея и плечи.

Массаж шеи и плеч особенно показан офисным работникам для расслабления мышц шеи и плеч и для профилактики шейного спондилеза.

### 2. Руки

С помощью массажера можно укрепить мышцы рук, избавиться от дряблости.

### 3. Область живота


Массажер поможет уменьшить живот, активизировать работу пищеварения, устранить запоры, укрепить брюшной пресс. В частности подходит для мужчин, желающих избавиться от «пивного» живота.

### 4. Бедра

Используйте массажер для укрепления дряблых и обвисших бедер, а также для борьбы с излишними жировыми отложениями.

### 5. Ноги

С помощью массажера можно избавиться от лишнего жира и сделать ноги более стройными.

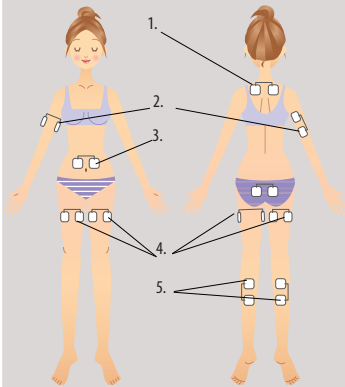

## ЧИСТКА И УХОД

### • Патчи для борьбы с жировыми отложениями

Запрещается подвергать патчи воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности, пыли или агрессивных веществ.

Клеящаяся сторона патча должна содержаться в чистоте. Следите, чтобы на нее не попадали капли пота и, в особенности, маслянистые вещества, в противном случае они могут утратить свою эффективность или даже быть повреждены.

Если патч стал хуже приклеиваться из-за пота, промойте его небольшим количеством холодной воды. Когда патч высохнет, клеящаяся сторона восстановит свои свойства.

Запрещается полностью погружать патч в воду, в противном случае им уже невозможно будет пользоваться и нужно будет приобретать новый.

Запрещается мыть патч горячей водой или применять для его очистки какие-либо чистящие средства.

Храните патчи в местах, недоступных для детей.

### • Корпус массажера

Запрещается подвергать массажер воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности, пыли или агрессивных веществ. Следите, чтобы внутрь корпуса массажера не попадала вода.

В случае загрязнения протрите массажер сухой мягкой тканью.

Запрещается погружать массажер в воду или использовать для его чистки агрессивные вещества.

Храните массажер в местах, недоступных для детей.



## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении каких-либо неисправностей в работе прибора воспользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить массажер, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

### • При нажатии кнопки ON/OFF/SET прибор не включается.

1. Если часть защитной бумаги патча оторвалась и прилипла к коже, массажер выключится автоматически.
2. Массажер не включится, если батарея разряжена. Зарядите встроенную батарею.
3. Если массажер упал в воду, то внутренние схемы могут быть повреждены в результате короткого замыкания. Если прибор падал в воду, не пытайтесь включать его, пока он полностью не высохнет.
4. Если патч использовался много раз или был поврежден, замените его новым.

### • Стимуляция очень слабая.

1. Плохой контакт между патчем и кожей. Убедитесь, что патч плотно прилегает к коже.
2. Установите более высокий уровень воздействия, нажимая кнопку +.
3. Если встроенная батарея разрядилась, своевременно зарядите ее.
4. Если патч поврежден, замените его.

### • Клеящаяся сторона патча слишком липкая

1. Оставьте патч в месте с повышенной влажностью, промойте патч небольшим количеством холодной воды и дайте высохнуть естественным способом.
2. При избыточном потоотделении перед использованием массажера следует вытереть пот.
3. Если патч использовался много раз и изнашивается, замените его новым.

### • Кожа покраснела, зуд

Эти явления могут быть вызваны слишком длительным временем воздействия. Сократите время процедуры.





## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение массажера:

5 В, постоянный ток, 100 мА

Мощность: 1.15 Вт

Время зарядки встроенной батареи:

3 ч

Вес брутто: 320 г

Габаритные размеры коробки:

121x175x68 мм



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой

право вносить изменения в конструкцию, дизайн

и комплектацию товара без предварительного

уведомления.



Дата производства: 07.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

**Центральный авторизованный сервисный центр:** ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Список сервисных центров прилагается**

**(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

**Производитель:**

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

**Manufacturer:**

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Единая справочная служба:  
8-800-100-3331**

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: \_\_\_\_\_

S/N:

Модель: \_\_\_\_\_

Версия: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_



[www.supra.ru](http://www.supra.ru)