

SUPRA



Руководство по эксплуатации
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
MBS-105

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Содержание

Введение.....	3
Меры предосторожности.....	4
Устройство прибора.....	5
Режимы работы прибора.....	6
Пользование прибором.....	7
Советы по уходу за кожей.....	9
Безопасная утилизация.....	10
Технические характеристики.....	10



ВВЕДЕНИЕ

Массажер предназначен для ухода за кожей мягким световым излучением различной длины волны. Прибор предназначен в основном для профилактики и коррекции возрастных изменений кожи. На клеточном уровне такой мягкий массаж оказывает положительное действие, усиливается микроциркуляция лимфы и крови, что придает коже более здоровый вид.

Разнообразные косметические средства по уходу за кожей воздействуют только на ее поверхностные слои, но не могут проникать глубже и оказывать воздействие на более глубокие слои кожи, содержащие коллаген – от которого зависит состояние кожи.

Обычно для доставки питания в глубокие слои кожи используются только инъекции, то сейчас с помощью данного прибора питательные вещества с использованием липосомного механизма могут быть доставлены к глубоким слоям кожи безболезненным и безопасным способом.

Данный прибор обладает уникальным глубоко стимулирующим эффектом и позволяет ускорять производство коллагена, подтянуть кожу, улучшить ее цвет. Для достижения максимальных результатов используйте прибор со специальными питательными составами, сывороткой, эфирным маслом или кремом.

В приборе используются специальные светодиоды, которые могут эффективно воздействовать на кожу, при этом, не причиняя ей вреда. Светодиодная панель прибора имеет пять режимов: розовый, красный, синий, желтый и комбинированный – каждый из этих режимов оказывает определенное воздействие на кожу в зависимости от ее типа.

Прибор может применяться в любое время года и при любом типе кожи. Наилучший результат достигается, если процедуры происхо-

дят периодически – примерно раз в 3-4 дня.

Идеально подходит для домашнего использования, так как имеет самый высокий и безопасный индекс эффективности среди аппаратов с подобным принципом действия.

Прибор обеспечивает очень мягкий и деликатный массаж на клеточном уровне, который активизирует обменные процессы в клетках кожи и оказывает мощное омолаживающее действие, не деформируя при этом кожу.

Результатом массажа прибором является усиленная выработка собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые отвечают за упругость, эластичность и увлажнение кожи.

При активном воздействии прибора существенно улучшается микроциркуляция крови и лимфы. Что приводит к улучшению цвета лица, снятию отеков и уменьшению количества и глубины морщин. Диспергирующее действие помогает выравнивать поверхность кожи и способно помочь избавиться от мелких шрамов, растяжек и рубцов после акне.

Происходит так называемый «эффект лифтинга», ведь исходящее излучение стимулирует появление коллагеновых и эластиновых волокон.

И главное! Научившись работать с Прибором для омоложения лица, любая женщина может молодеть в домашних условиях.

Универсальность прибора определяется возможностью выбора интенсивности и спектра (цвета) действующих волн.

Ведь от того, какой цвет выбран для воздействия на кожу, напрямую зависит результат, который вы хотите получить!

- **Спектрально голубой** успокаивает кожу. Может применяться против кожной сыпи, подходит для чувствительной и жирной кожи, помогает избавиться от прыщей. Особенность: регулирует секретно-жировой баланс кожи, подтягивает и сужает кожные покровы, помогает достичь косметического эффекта.

- **Спектрально красный** проникает глубоко в дерму и стимулирует клеточные волокна. Нагревание улучшает циркуляцию крови, обмен белка.

Особенность: уменьшает морщины, делает кожу более эластичной и гладкой. Мягкие волны подходят для кожи вокруг глаз и кожи лба.

- **Спектрально желтый** свет подходит для комбинированной кожи. Улучшает обменные функции кислорода в клетках и активизирует циркуляцию на поверхности. Особенность: успокаивает кожу, помогает расслабить тело, снижает болевые ощущения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

(при пользовании бытовым электроприбором)

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данный раздел. Выполняйте все приведенные здесь инструкции.

Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно ремонтировать прибор.

Запрещается использовать неисправный прибор, кабель или адаптер питания. Если прибор или кабель с адаптером питания неисправны, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для ремонта или замены.

Используйте прибор только по его прямому назначению и только так, как описано в руководстве по эксплуатации.

Запрещается подвергать прибор воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, воды и высокой влажности.

Храните прибор в местах, недоступных для детей.

Не разрешайте детям играть с прибором.

Берегите прибор от падений и ударов.

Если в процессе использования вы заметили, что прибор нагрелся сильнее обычного, немедленно прекратите использование и отключите его от электросети.

• *прохождение медицинского лечения - следует обязательно согласовать с лечащим врачом возможность использования прибора)*

• *заболевания кожи, в том числе солнечные ожоги и повышенная чувствительность*

• *беременность, кормление грудью*

• *ананетия (расширение сосудов)*

• *дискомфорт во время процедуры*

В любом случае следует проконсультироваться у медицинского специалиста перед использованием прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

(популярные)

ВНИМАНИЕ!

• *Запрещается использовать прибор:*

• *при беременности.*

• *при наличии металлических, силиконовых или гелевых имплантатов на лице.*

• *при солнечных ожогах.*

• *при наличии дерматитов, вызванных воздействием косметических средств.*

• *при воспалении кожных покровов.*

• *при наличии зуда, раздражений.*

• *при длительном применении стероидов.*

• *при наличии гормональной и печеночной дисфункции.*

• *при наличии металлических имплантатов в теле.*

• *при заболеваниях сердца.*

• *на горловой части шеи и глазах.*

• *на других частях тела, которые не описаны в инструкции*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

(медицинские)

ВНИМАНИЕ!

• *Запрещается использовать прибор при наличии следующих противопоказаний:*

• *высокая температура*

• *заразные заболевания*

• *онкологические заболевания*


• *открытые раны на обрабатываемых участках кожи*

• *обострение хронических заболеваний*

• *заболевания сердца, в том числе гипотония и гипертония*

• *использование электронного кардиостимулятора, искусственного сердца, легкого и т.п.*

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

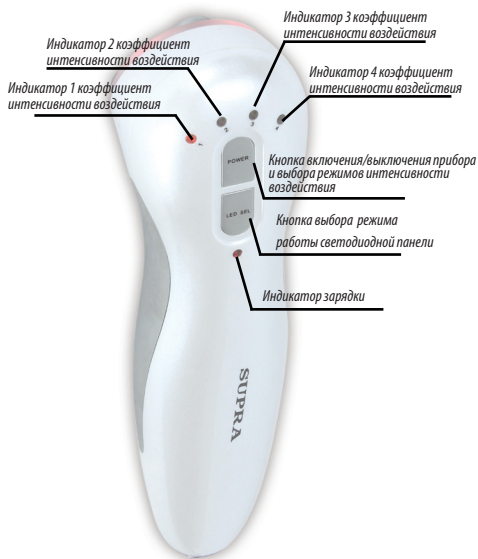

Синий цвет подходит для любого типа кожи, в том числе, для чувствительной и жирной. Оказывает воздействие на глубину 0,5 мм. Устраняет акне, различного рода воспаления, подтягивает и уплотняет кожу.

Желтый свет подходит для смешанной кожи. Оказывает воздействие на глубину 3-5 мм, затрагивая не только эпидермис, но и дерму. Улучшает дыхание кожной системы, кровообращение, уменьшает отечность лица, нормализует процессы возбуждения и торможения в коже.


Красный свет подходит для любого типа кожи. Оказывает воздействие на глубину 8-10 мм. Ускоряет синтез коллагена и эластина, устраняя морщинки и разглаживая складки, снимает мышечные спазмы, усиливает регенерацию тканей.

Розовый свет представляет собой комбинацию описанных выше цветов. Его воздействие носит комбинированный, комплексный характер.

Пульсирующий розовый свет сочетает эффективность комплексного воздействия розового при большей удельной эффективности, полученной за счет динамического управления амплитудой волн.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА

Режим 1

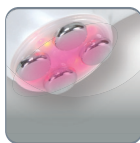


Нажмите кнопку выбора режима работы светодиодной панели один раз, чтобы светодиодная панель загорелась «розовым» светом, состоящим из синего, желтого и красного света.

Назначение:

Данный режим предназначен успокоить кожу и снять покраснения, применяется против сыпи, для улучшения и выравнивания цвета лица. Идеален для чувствительной кожи.

Режим 2

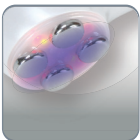


Нажмите кнопку выбора режима работы светодиодной панели два раза, чтобы светодиодная панель загорелась голубым светом с длиной волны 415 нм (± 10 нм).

Назначение:

Данный режим предназначен для смягчения грубой кожи и сужения пор, при регулярном применении от 3 мес нормализует работу сальных желез. Идеален для жирной кожи.

Режим 3

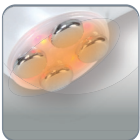


Нажмите кнопку выбора режима работы светодиодной панели три раза, чтобы светодиодная панель загорелась желтым светом с длиной волны 590 нм (± 10 нм).

Назначение:

Данный режим предназначен для улучшения обменных функций кислорода в клетке и активирует функции микроциркуляции на поверхности. Т.О. придает коже прозрачность и улучшает цвет лица, а также помогает коже расслабиться. Идеален для комбинированной кожи.

Режим 4

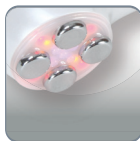


нм).

Нажмите кнопку выбора режима работы светодиодной панели четыре раза, чтобы светодиодная панель загорелась бледно-красным светом с длиной волны 620 нм (± 10

Назначение:

Данный режим предназначен для стимуляции производства коллагена и восстановления эластичности кожи. Используйте этот режим, если на коже появились морщины. Идеален для комбинированной

Режим 5

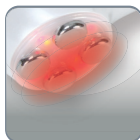

Нажмите кнопку выбора режима работы светодиодной панели пять раз, чтобы светодиодная панель начала гореть мигающим «розовым»

светом.

Назначение:

Данный режим способствует лучшему впитыванию средств для выравнивания цвета кожи и улучшения цвета лица.




Направляйте прибор медленно от подбородка к ушам в течении 5 секунд. Выполняйте движение симметрично

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

1. Зарядка батареи прибора

Перед первым использованием прибора и в дальнейшем при необходимости зарядите встроенную батарею прибора. Для этого:

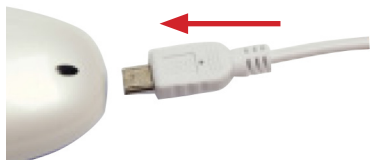

Подключите один конец USB-кабеля к мини-USB разъему прибора.



Другой конец USB-кабеля подключите к адаптеру питания.

Адаптер питания подключите к электрической розетке с напряжением, соответствующем указанному на корпусе адаптера.

Во время зарядки батареи индикатор зарядки горит красным светом. Когда батарея полностью зарядится, индикатор зарядки начнет гореть зеленым светом.

Для полной зарядки батареи прибора требуется примерно 4 часа.

2. Подготовка кожи

Процедура с использованием прибора должна начинаться с очищения кожи.

Для этого рекомендуется использовать очищающий лосьон или Очищающее молочко. Проследите, чтобы на коже не осталось никаких загрязнений, так как прибор может усилить негативное воздействие на кожу этих веществ.

Затем нанесите на нее питательный состав, гель или крем.

Внимание!

Перед систематическим использованием питательного состава, крема или геля необходимо провести его проверку на отсутствие персональной непереносимости.

Для этого:

- Очистите участок кожи, например на запястье.
- Нанесите проверяемое средство на кожу и дайте ему впитаться.
- Обработанный участок не должен по возможности соприкасаться с водой.
- В случае покраснения или другой нежелательной реакции немедленно удалить остатки средства.
- Начинайте использование прибора только после 48 часового тестирования и отсутствия нежелательной реакции на состав.
- Немедленно обратитесь к врачу, если появилась кожная аллергия или другие нежелательные симптомы.

3. Пользование прибором

Во время процедуры кожа постоянно должна быть увлажненной. Для увлажнения используйте специальные питательные составы.

Нажмите кнопку включения, чтобы включить прибор. Светодиодная панель загорится «розовым» цветом, прибор начнет работать с 1 (минимальным) уровнем интенсивности.

Последовательно нажимайте кнопку включения/выбора режимов интенсивности, чтобы выбрать нужный режим от 1 до 4, при этом будет загораться индикатор текущего режима интенсивности. 1 – самая малая интенсивность, 4 – максимальная интенсивность. После пятого нажатия прибор выключится.

Во время процедуры держите прибор за проводящие металлические пластины по бокам, чтобы при контакте с телом образовалась электрическая цепь.



Увлажните кожу.
Нанесите состав и на кожу, и на рабочую поверхность прибора. Количество наносимой жидкости – не более 4-5 граммов.



Рабочая поверхность должна плотно прилегать к коже.

Медленно перемещайте прибор снизу вверх и от центра к краям лица.



Выполняйте движения симметрично.



При обработке кожи вблизи глаз проявите максимальную осторожность, исключив сильный нажим на кожу



В районе носа следует изменить направление движения от края лица к центру.



Рекомендуется соблюдать определенную последовательность в обработке участков кожи лица.

Каждые 10 секунд вы будете слышать сигнал, который поможет соблюсти необходимую длительность процедуры на каждом участке кожи и вовремя перейти на следующий участок.

Во время процедуры кожей будет ощущаться тепло (примерно 40°C).

Каждые 10 секунд устройство будет подавать звуковой сигнал, который поможет правильно распределить длительность воздействия на разные участки кожи.

Рекомендуемая длительность процедуры составляет не более 10 минут, поэтому каждые 10 минут прибор будет автоматически выключаться.

Процедуры следует проводить с равномерной периодичностью.

После процедуры рабочую поверхность необходимо обработать дезинфицирующими средствами.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ.



Направляйте прибор медленно от подбородка к ушам в течении 5 секунд. Выполняйте движение симметрично.

Ежедневный уход.

Не используйте прибор чаще 3-х раз в неделю не дольше 30 минут.

Шаг 1. Глубокая очистка кожи

(улучшение цвета лица и выравнивание кожи)

Данная процедура поможет Вашей коже выглядеть привлекательно, сиять и поможет избавиться от сыпи и покраснений, сужает поры.

- Удалите макияж специальным средством. Обработайте прибор перед использованием.
- Проследите, чтобы на коже не осталось никаких загрязнений.
- Выберите режим 1 (спектральный «розовый» свет) и комфортный для Вас коэффициент активности (от 1 до 4).
- Выполняйте движения по массажным линиям как на картинке. Каждое движение по 5 секунд. Итоге сеанс не более 5 минут одним светом. Лицо должно быть увлажненным во время всей процедуры.
- Повторите тоже «голубым» и «жёлтым».
- Умойте лицо и обработайте прибор.

Шаг 2. Питание и контуры лица

Данная процедура поможет Вашей коже стать более упругой увлажненной и придаст матовость коже и лёгкий румянец.

- Очистите кожу лица.
- Нанесите питательный крем.
- Обработайте прибор перед использованием.
- Выберите режим 4 (красный свет) и комфортный для Вас коэффициент активности (от 1 до 4).
- Выполняйте движения по массажным линиям как на картинке. Каждое движение по 5 секунд. Итоге сеанс не более 3 минут одним светом, если Вам не более 32 лет или 5 минут если вам более 32 лет. Лицо должно быть увлажненным во время всей процедуры.
- Обработайте прибор после использования.

Шаг 3. Удаление морщин

Данная процедура придаст гладкость коже и вернет тургор.

- Сначала пройдите процедуру глубокого очищения (описание шаг 1)
- Процедура питания и контуры лица (описание шаг 2)
- Выберите режим 5 (красный пульсирующий свет) и комфортный для Вас коэффициент активности (от 1 до 4).
- Выполняйте движения по массажным линиям как на картинке. Каждое движение по 5 секунд. Итоге сеанс не более 3-4 минут этим светом. Лицо должно быть увлажненным во время всей процедуры.
- Обработайте прибор после использования.



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение адаптера питания:

100-240В /50Гц

Выходное напряжение адаптера питания: 5В,
постоянный ток

Встроенное питание: Lilon аккумуляторная батарея

Максимальная потребляемая мощность: 3Вт

Время автономной работы: не менее 60минут

Время зарядки встроенной батареи: не более 2ч

Вес прибора: 93г

Габаритные размеры прибора: 96x80x180мм

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 07.2014
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф, комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331



Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

SN:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

Ваши наблюдения

A vertical line divides the page into two columns, each containing 25 dotted horizontal lines for writing.



www.supra.ru