

Массажер против морщин
MFS-101

*Руководство
по эксплуатации*



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации" и, если массажер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Содержание

Указания по технике безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство прибора.....	5
Описание модели.....	7
Порядок работы.....	7
Чистка прибора и уход за ним.....	7
Безопасная утилизация.....	7
Технические характеристики.....	8

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **!!!** Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием массажера полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден - обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Выключайте устройство тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.

- Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
- Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
- При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно отключите его.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.


- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер - 1

Руководство по эксплуатации - 1

УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

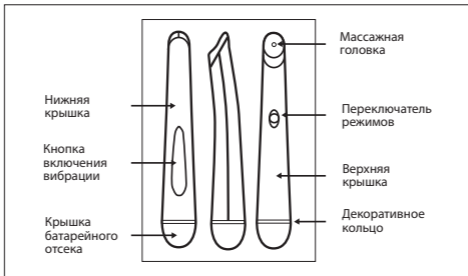

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Данная модель предназначена для очищения и массажа зоны вокруг глаз. В приборе используется ионизация, вибрация и светодиодный свет:

- Положительные ионы эффективно очищают поры, подготавливая кожу к дальнейшему уходу.
- Отрицательные ионы помогают крему или другому средству по уходу за кожей вокруг глаз эффективно проникать в кожу.
- Красный фотонный свет способствует увеличению производства коллагена, в результате кожа становится более упругой и подтянутой.
- Синий фотонный свет эффективно убивает бактерии, восстанавливая свежесть и мягкость кожи.
- Высокочастотная вибрация позволяет провести эффективный массаж кожи вокруг глаз, улучшить ее кровоснабжение, а также способствует проникновению крема или другого средства по уходу в кожу.

Выбор режима осуществляется переключателем на корпусе. Во время работы прибора нажмите и удерживайте кнопку на корпусе, чтобы включить функцию вибрации.

Массажная головка будет вибрировать при соприкосновении с кожей. Переведите переключатель в положение к массажной головке, чтобы выполнить процедуру очищения кожи. В данном режиме светодиод массажной головки горит синим светом. Режим очищения позволяет очистить кожу от бактерий, восстановить ее свежесть и мягкость. При необходимости вы также можете выполнить массаж с помощью функции вибрации. Переведите переключатель режимов в положение от массажной головки, чтобы выполнить процедуру массажа кожи. В данном режиме светодиод массажной головки горит красным светом. Режим массажа служит для стимуляции производства коллагена, и позволяет сделать кожу более упругой и подтянутой. Вы можете дополнительно использовать функцию вибрации. Чтобы выключить массажер, переведите переключатель режимов в центральное положение.

Для получения лучших результатов рекомендуется использовать массажер совместно с кремом или другим средством по уходу за кожей вокруг глаз.

Прибор питается от одной батарейки типа АА.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте батарейный отсек, установите в него одну батарейку типа АА в соответствии с обозначениями полярности и закройте крышку отсека.
2. Переключателем режимов выберите режим очищения или массажа.
3. В режиме очищения загорается синий свет и излучаются положительные ионы для очищения кожи.
4. В режиме массажа загорается красный свет и излучаются отрицательные ионы для усиления проникновения крема или другого средства в кожу.
5. Чтобы использовать функцию вибрации, в режиме очищения или массажа нажмите и удерживайте кнопку на корпусе. Массажная головка будет вибрировать при соприкосновении с кожей.
6. Прибор выключается автоматически через три минуты работы.
7. Если вы не планируете использовать массажер в течение длительного времени, извлеките из него батарейку, чтобы не допустить утечки электролита.

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Перед чисткой всегда выключайте прибор.
- Протрите корпус прибора влажной тканью. Запрещается погружать прибор в воду или использовать агрессивные или абразивные средства для его чистки.
- Дайте прибору высохнуть и остыть и уберите на хранение. Храните прибор в прохладном, сухом и темном месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров.

Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 1,5 В

Питание: АА батарейка

Размеры в упаковке: 95x180 мм

Вес с упаковкой: 0,04 кг

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Производитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.

Товар подлежит обязательной сертификации.

Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail:
service@deltael.ru

