

Инструкция по эксплуатации вибромассажного прибора для омоложения кожи лица ТВ-1682

Инструкции по технике безопасности

Для обеспечения правильной эксплуатации данного прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего обращения.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте данный прибор при следующих условиях:

- если Вы беременны,
- если Вам меньше 16 лет,
- если у Вас чувствительная кожа,
- если на Вас нанесен макияж,
- если у Вас аллергенная кожа,

Не используйте прибор в таких областях, как:

- веки, передняя поверхность шеи в области гортани

Избегайте контакта прибора с областями, где проводилась фотоэпиляция или пластическая хирургия.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к специалисту, если Вы почувствовали недомогание.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте прибор в условиях жаркого климата или во влажной среде.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно.

5. ВНИМАНИЕ! Перед процедурой необходимо снять ювелирные украшения и убрать волосы.

6. ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что солнечная батарея подвергается воздействию света.

Продукт

1. Спецификация

Наименование: Прибор для массажа лица

Модель: ТВ-1682

Номинальное напряжение: 1.5В

Номинальный ток: 10 мкА

Материал: акрилонитрилбутадиенстирол

Исполнительный Стандарт: Q/YUN1002-2015

2. Описание товара (рис.1)

- 1) Массажные ролики
- 2) Батарея питания в комплекте
- 3) Ручка
- 4) Салфетка для очистки прибора
- 5) Сумка для хранения

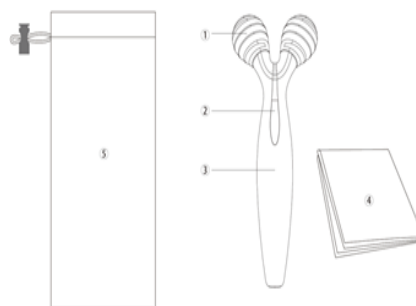


Рис. 1

3. Использование прибора

Применяйте прибор под разными углами для достижения максимального результата (рис.2).

1) **Лицо:** плавно проводите роликами по линии от челюсти до скул

① → ② → ③. Затем мягко ведите массажером от уголков рта к уху ④ (рис. 3)

2) **Шея:** равномерно проводите роликами от плеч до подбородка (рис 4.)

3) **Руки:** плавно проводите роликами вдоль руки (рис. 5)



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

4. Рекомендации по применению прибора

1) Очищайте прибор после каждого применения специальной салфеткой.

2) Не погружайте прибор в воду.

3) Не используйте стальные губки, абразивные чистящие средства или едкие жидкости для того, чтобы очистить прибор.

Обслуживание

1. ЭКО-советы

Пожалуйста, не выбрасывайте прибор с бытовыми отходами, вместо этого изделие следует сдать в соответствующий пункт сбора.

2. Гарантия и техническое обслуживание

Если вам нужна любая услуга, информация, или, если у Вас есть вопросы, то, пожалуйста, посетите сайт TOUCHBeauty в www.touchbeauty.com или обратитесь к Вашему местному продавцу touchbeauty™.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD

Адресс: 7/F, BUILDING A, MARINA BAY CENTER, 2021 HAIXIU ROAD, BAO'AN CENTRAL DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 518133

Авторское Право © TOUCHBeauty. Все Права Защищены.

www.touchbeauty.com

Товар сертифицирован по ТР ТС 020/2011

Товар не медицинского назначения

Срок службы прибора - 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Дата производства указывается на упаковке



Гарантийный талон	
Условия гарантии	Гарантийный талон
1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - вскрытия пломб на изделии; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие (пульт, шнуры, адаптер, батарейки и т.п.) 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 года. 7. Срок службы – 3 года.	Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: М.П.