

# Инструкция по эксплуатации прибор для омоложения кожи лица (для борьбы с черными точками / акне) ТВ-1611В

## Инструкции по технике безопасности

Для обеспечения правильной эксплуатации данного прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора и сохраните его для дальнейшего использования.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте данный прибор при следующих условиях:

- если Вы беременны,
- если Вам меньше 16 лет,
- если у Вас чувствительная кожа,
- если у Вас макияж,
- если у Вас аллергенная кожа.

Не используйте прибор в таких областях, как:

- веки, шея,
- области, где была проведена фотоэпиляция или пластическая хирургия.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к специалисту, если вы почувствовали недомогание.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте прибор в условиях жаркого климата или во влажной среде.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не бросайте прибор в огонь, чтобы избежать взрыва.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избегайте прямого попадания света в глаза.

## Продукт

### 1. Спецификация

Наименование: Прибор для омоложения кожи лица

Модель.: ТВ-1611В

Номинальное напряжение: 3В

Номинальная Мощность: 0.6 Вт

Питание: 2ААА

Размер: 34 мм\*37мм\*173мм

Материал: акрилонитрилбутадиенстирол

Исполнительный Стандарт: Q/YYN1002-2015

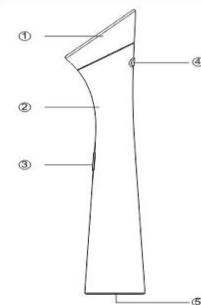


Рис.1

### 2. Описание товара (рис.1)

1) Синий светодиод 415 нм

2) Корпус

3) Кнопка питания

4) Кнопка извлечения световой головки

5) Крышка аккумулятора

### 3. Использование прибора

Перед использованием прибора откройте крышку батарейного отсека и вставьте 2 ААА батарейки.

#### 3.1. Извлечение и установка световой головки

Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы заменить световую головку:

1) Крепко держите прибор в руках, нажмите на кнопку «Извлечение световой головки» (4), и осторожно потяните за головку.

2) Удерживая кнопку «Извлечение световой головки» (4), установите световую головку, отпустите кнопку.

3) Прежде чем начать использовать прибор, проверьте правильно ли установлена головка.

#### 4. Рекомендации к ежедневному применению

1) Предварительно очистив кожу, долго удерживайте кнопку питания, синий светодиод автоматически начнет работу.

Приложите устройство к Вашей коже. Синий светодиод рекомендуется использовать один раз в день в течение 12 минут.

2) Для того, чтобы выключить устройство долго удерживайте кнопку питания. Умный датчик автоматически выключит устройство в течение 12 минут.

3) Сигнал разряда батареи: когда устройство разрядится, прозвучит длинный сигнал «Di», и устройство автоматически отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Световая функция устройства также имеет мигающий режим, который автоматически начнет работу во время пользования.

#### Рекомендации по применению прибора

1) Используйте ткань или салфетку для очистки прибора после использования. Выключите прибор перед началом его очистки.

2) Не используйте воду, спирт, стальные губки, абразивные чистящие средства или едкие жидкости, чтобы очистить прибор. Это может привести к его повреждению или обесцвечиванию.

## Обслуживание

### 1. ЭКО-советы

Прибор имеет встроенный аккумулятор. Батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды, пожалуйста, не выбрасывайте прибор с обычными бытовыми отходами, вместо этого изделие следует сдать в официальный пункт сбора.

### 2. Выявление и устранение неполадок

Проблема	Возможная причина проблемы	Решение
Прибор не работает	Проверьте, установлена ли световая головка	Установите световую головку согласно инструкции
	Села батарея	Установите батарею согласно инструкции
	Батарея установлена неверно	Переставьте батарею правильно
Если у Вас проблема, которая не указана в данной таблице, обратитесь к Вашему местному продавцу touchbeauty™ за помощью		

### 3. Гарантия и обслуживание

Если вам нужна любая услуга, информация, или, если у Вас есть вопросы, то, пожалуйста, посетите сайт TOUCHBeauty в [www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com) или обратитесь к вашему местному продавцу touchbeauty™.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.

Адрес: PINGSHAN NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, P.R. CHINA

Авторское Право © TOUCHBeauty. Все Права Защищены.

[www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com)

Товар сертифицирован по ТР ТС 020/2011

Товар не медицинского назначения

Срок службы прибора - 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Дата производства указывается на упаковке



Гарантийный талон

Условия гарантии	Гарантийный талон
<p>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</p> <p>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</p> <p>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механических повреждений;</li> <li>- вскрытия пломб на изделии;</li> <li>- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li> <li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li> </ul> <p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие (пульт, шнуры, адаптер, батарейки и т.п.)</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</p> <p>6. Гарантийный срок – 1 года.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p>	<p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p style="text-align: center;">М.П.</p>