

# REMINGTON | REVEAL


DIAMOND MICRODERMABRASION



GUARANTEE <sup>+1</sup>  
**2** yr  
MD3000


## ★ О ВАШЕМ ПРИБОРЕ

- Прибор алмазной микрошлифовки REVEAL включает в себя три разных алмазных наконечника, с помощью которых вы можете подобрать наиболее подходящую вам процедуру ухода. Рис. 1.

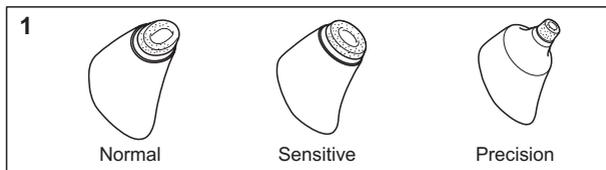

- Normal - Алмазный наконечник для НОРМАЛЬНОЙ кожи — для умеренно чувствительных участков лица и шеи.
- Sensitive - Алмазный наконечник для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ кожи — для нежных участков или чувствительной кожи.
- Precision - ПРЕЦИЗИОННЫЙ алмазный наконечник — для точной обработки небольших участков, например носа, и труднодоступных зон.

Прибор алмазной микрошлифовки REVEAL также предлагает четыре уровня всасывания, позволяя вам выбрать наиболее безопасные, приятные и эффективные комбинации для вашего типа кожи.

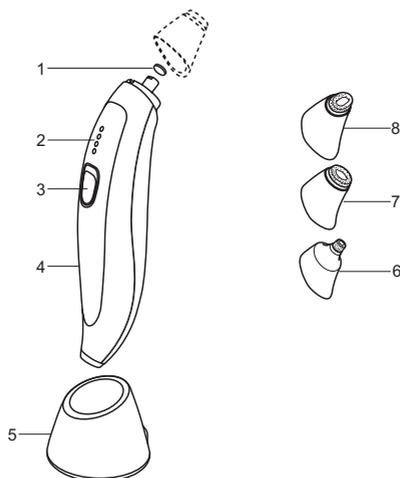

## 👁 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- |   |   |
|---|---|
| 1. Фильтр с возможностью замены           | кожи  |
| 2. Светодиодный индикатор уровня заряда   | 8. Алмазный наконечник для нормальной кожи      |
| 3. Выключатель питания                    | 9. Пакет с запасными фильтрами (не показан)     |
| 4. Эргономичная рукоятка                  | 10. Сумка для хранения (На рисунке не показана) |
| 5. Зарядное устройство                    | 11. Переходник (На рисунке не показан)          |
| 6. Прецизионный алмазный наконечник       | 12. Щетка для чистки (На рисунке не показана)   |
| 7. Алмазный наконечник для чувствительной |   |

## 👁️ НАЧАЛО РАБОТЫ

При первом использовании прибора алмазной микрошлифовки REVEAL будьте терпеливы: как и в случае с любым другим новым прибором, вам, возможно, потребуется некоторое время, чтобы полностью ознакомиться с его функциями. Разберитесь в функциях и особенностях прибора для микрошлифовки, и вы не пожалеете: мы уверены, что вас ждут долгие годы приятного использования и полного удовлетворения полученными результатами.

## 🔌 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

- 1 Перед зарядкой убедитесь, что ваши руки, прибор алмазной микрошлифовки, зарядное устройство и переходник сухие.
- 2 Перед первым использованием прибора алмазной микрошлифовки рекомендуется полностью зарядить его. Полный цикл зарядки займет 4 часа.
- 3 Убедитесь, что изделие выключено.
- 4 Вставьте зарядный переходник в зарядное устройство. Рис. 2.

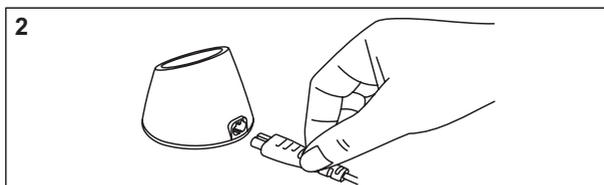

- 5 Включите переходник в розетку.
  - 6 Установите прибор алмазной микрошлифовки в зарядное устройство. Прибор алмазной микрошлифовки нужно располагать так, чтобы фигурное гнездо на его конце совпадало со штекером на зарядном устройстве.
  - 7 Светодиодные индикаторы начинают поочередно светиться, показывая, что выполняется зарядка прибора алмазной микрошлифовки.
  - 8 Когда прибор алмазной микрошлифовки будет полностью заряжен, все светодиодные индикаторы будут в течение минуты светиться, не мигая, а затем погаснут. Полный цикл зарядки займет 4 часа.
  - 9 Один полный заряд обеспечивает 90 минут работы в беспроводном режиме, в зависимости от выбранного уровня скорости.
- ✳️ **ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае низкого заряда все 4 светодиодных индикатора будут синхронно мигать, показывая, что прибор нуждается в зарядке.

### ✳️ ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ПОДЗАРЯДКИ:

- В приборе алмазной микрошлифовки также предусмотрена функция быстрой подзарядки.
- Чтобы воспользоваться этой функцией, заряжайте прибор алмазной микрошлифовки в течение 5 минут.
- Этот уровень заряда даст возможность использовать прибор приблизительно 1 или 2 раза.

## 🔌 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный прибор можно использовать исключительно в сухих условиях. Не используйте его в душе или в ванне.

- ✳️ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Поскольку в процессе алмазной микрошлифовки используется обработка алмазными наконечниками совместно с вакуумным всасыванием, после процедуры вы, в зависимости от типа вашей кожи, можете отметить некоторое покраснение и увеличение чувствительности. Такая реакция считается полностью нормальной и обычно проходит в течение нескольких часов.


- ✳ **СОВЕТ.** Поскольку после обработки может возникнуть покраснение, рекомендуется выполнять процедуру в конце дня.
- В связи с этим настоятельно рекомендуется протестировать прибор на участке с внутренней стороны предплечья, чтобы понять, как работает прибор, и увидеть реакцию кожи.
- ✳ **СОВЕТ.** Кроме того, рекомендуется проводить это тестирование с использованием алмазного наконечника для чувствительной кожи и на самом низком уровне всасывания.
- Когда вы ознакомитесь с прибором и тем, как оно влияет на вашу кожу, вы сможете подобрать для себя правильную процедуру обработки, изменяя настройки и выбирая нужный наконечник.
- Во время использования вы будете чувствовать, как алмазный наконечник касается вашей кожи, а также ощущать эффект мягкого всасывания от вакуумного насоса.
- Нежелательные реакции встречаются редко, однако если ваша кожа слишком воспалилась и раздражена, немедленно прекратите использование прибора.

## 🔍 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 Снимите с прибора все упаковочные материалы.
- 2 Для вашего удобства прибор поставляется с уже установленным фильтром для первой обработки.
- ✳ **СОВЕТ.** Перед началом обработки рекомендуется убедиться, что фильтр установлен.
- 3 Выберите нужный алмазный наконечник и начните процедуру обработки.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Из соображений гигиены наконечники поставляются обернутыми в прозрачную упаковку, которую необходимо снять перед использованием. Они крепятся к корпусу прибора магнитами и должны быть полностью вставлены в корпус для оптимальной работы всасывания.
- 4 Перед использованием прибора умойтесь и насухо вытрите лицо.
- 5 Уберите волосы и закрепите их обручем или соберите в хвост.
- 6 Включите прибор с помощью выключателя питания.
- 7 Выберите желаемый уровень всасывания.
  - Устройство алмазной микрошлифовки автоматически запускается с самым низким уровнем всасывания.
  - Уровень всасывания регулируется повторным нажатием выключателя питания.
  - Количество светящихся светодиодных индикаторов обозначает выбранный уровень всасывания. Один светящийся светодиодный индикатор показывает, что выбран самый низкий уровень. Четыре светящихся светодиодных индикатора показывают, что выбран самый высокий уровень.
- 8 Чтобы выключить прибор, нажмите выключатель питания еще раз и удерживайте его нажатым.

## 👁 ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ

- Процедура обработки лица занимает примерно 3 минуты.
- Обработка каждой зоны занимает от 20 до 30 с. Придерживаясь рекомендованного направления движений, как показано стрелками. Рис. 3.

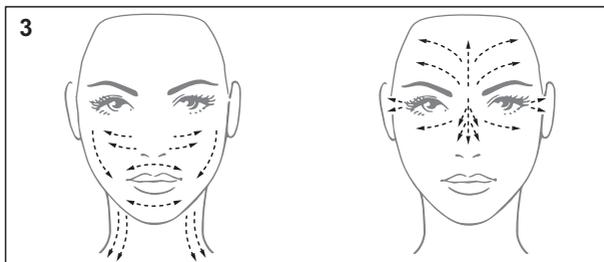

- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Точное время обработки зависит от типа кожи и обрабатываемой зоны.

- **Не следует повторно проводить алмазным наконечником по обрабатываемому участку, то есть, проведя один раз алмазным наконечником по участку кожи, переходите к следующему необработанному участку.**
- Для обеспечения оптимальных результатов следите, чтобы алмазный наконечник располагался ровно и полностью касался кожи.
- Не прижимайте алмазный наконечник к коже слишком сильно, позвольте прибору сделать всю работу за вас.
- Во время обработки вы должны ощущать приятное легкое всасывание по мере перемещения алмазного наконечника по коже.
- Если алмазный наконечник в процессе обработки ощущается как слегка шероховатый, это нормально, однако это ощущение не должно причинять дискомфорт.

### ★ СОВЕТЫ ПО ОБРАБОТКЕ

- Выбирайте алмазный наконечник, который подходит для обрабатываемой зоны лица.
- Всасывающий алмазный наконечник всегда должен касаться кожи, при этом следите, чтобы наконечник не задерживался на одном участке.

★ ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускайте, чтобы наконечник задерживался на одном участке, поскольку длительное воздействие всасывания может вызвать сильный прилив крови к поверхности кожи и стать причиной покраснения, воспаления или образования синяка.

- Во время обработки может помочь незначительное натягивание кожи второй рукой.
- Ни в коем случае не используйте высокий уровень всасывания для обработки нежных участков кожи вокруг глаз.
- Не следует использовать прибор для обработки кожи под глазами или век.
- Не используйте прибор для обработки участков кожи с родинками, татуировками и перманентным макияжем.
- При обработке обязательно соблюдайте рекомендованные направления движений, как показано на иллюстрации.

### ★ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

- Ополосните лицо холодной водой, чтобы убрать остатки омертвевших клеток кожи.
- Нанесите на всю обработанную область свой любимый питательный увлажняющий крем.
- **Не используйте увлажняющие кремы на основе кислоты.**
- Если вы планируете выйти на улицу, то нанесите на обработанные участки кожи солнцезащитный крем. Некоторое время после обработки избегайте находиться на солнце или загорать.

### ★ ЧАСТОТА ОБРАБОТКИ

- Чтобы алмазная микрошлифовка дала оптимальные результаты, важно предусмотреть достаточные перерывы между обработками, чтобы дать возможность клеткам верхних слоев кожи восстановиться и придать коже здоровый, сияющий вид. Длительность такого перерыва зависит от возраста и типа кожи.
- Кроме того, важно делать достаточный перерыв между обработками, чтобы иметь возможность оценить состояние кожи и определить надлежащее время для следующей обработки.
- **По этой причине рекомендуется проводить не более одной-двух обработок в неделю.**

### 👁 УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

Процесс алмазной микрошлифовки предусматривает удаление омертвевших клеток кожи с наружной поверхности кожи. Устройство оснащается одноразовым фильтром, который собирает частицы кожи во время обработки.


- Для вашего удобства прибор поставляется с уже установленным фильтром для первой обработки, а в комплект поставки входят запасные фильтры.

- Из соображений гигиены и ради обеспечения оптимальной эффективности изделия важно заменять фильтр после каждого применения и устанавливать в прибор новый, неиспользованный фильтр перед каждой обработкой.

✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед использованием обязательно удостоверьтесь, что в прибор установлен новый фильтр. Если использовать прибор без фильтра, частицы кожи попадут в механизм насоса, что приведет к сокращению срока службы прибора и потере гарантии.

## ✳ ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

- Снимите наконечник с рукоятки.
- Подцепите кончиком пальца круглый черный фильтр на конце всасывающего патрубка, извлеките этот фильтр и утилизируйте его.
- Установите на всасывающий патрубок новый фильтр и осторожно надавите на него кончиком пальца до полной установки. Рис. 4.

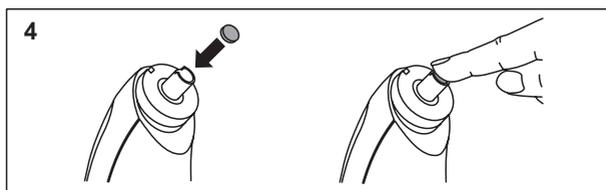


## 👁 ЗАМЕНА АЛМАЗНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Из соображений гигиены наконечники поставляются обернутыми в прозрачную упаковку, которую необходимо снять перед первым использованием. Они крепятся к корпусу прибора магнитами и должны быть полностью вставлены в корпус для оптимальной работы всасывания.

### ✳ Снятие или замена алмазных наконечников

- Возьмитесь за прибор алмазной микрошлифовки одной рукой.
- Другой рукой аккуратно потяните алмазный наконечник вверх, чтобы снять его. Рис. 5.
- Чтобы установить алмазный наконечник, аккуратно расположите его в нужном положении и дождитесь, пока он не зафиксируется под действием магнитов. Рис. 6.

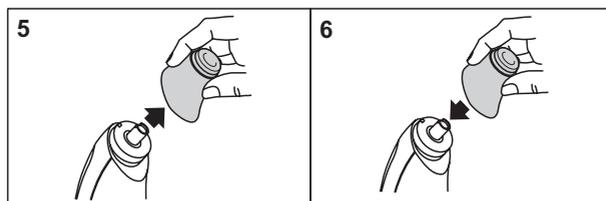

## 👁 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Рукоятка прибора алмазной микрошлифовки не является водонепроницаемой. Не погружайте рукоятку в воду и не держите ее под проточной водой, чтобы очистить.
- Чтобы надолго сохранить прекрасные характеристики прибора алмазной микрошлифовки и его гигиеническое состояние, очищайте алмазные наконечники и рукоятку после каждого использования.
- Следите за тем, чтобы во время чистки прибор алмазной микрошлифовки было выключено.
- Снимите алмазный наконечник и удалите входящей в комплект щеткой для чистки остатки частиц кожи. После этого наконечники можно будет промыть проточной водой. Дайте наконечнику высохнуть на воздухе.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Со временем в алмазных наконечниках могут накапливаться клетки кожи, что снижает их эффективность. В этом случае можно периодически очищать алмазные наконечники водным раствором спиртового дезинфицирующего средства для парикмахерских.

- Старайтесь не повредить алмазные наконечники. Не роняйте наконечники. Не используйте для чистки наконечников агрессивные химические вещества, абразивные губки или абразивные чистящие вещества.
- ✳ **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как включить зарядное устройство в розетку, убедитесь, что все его части сухие.

✳ **ХРАНЕНИЕ**

- Храните прибор в чистом сухом месте вдали от детей.
- Не убирайте прибор на хранение, пока оно не высохнет после чистки. Перед помещением на хранение дайте прибору высохнуть на воздухе.
- Не храните абразивные наконечники в месте, где они могут соприкоснуться с другими предметами, способными их повредить.

 **УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

Прежде чем утилизировать прибор алмазной микрошлифовки, нужно извлечь из него аккумуляторную батарею.

При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.

✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Батарея в этом приборе не подлежит замене. Когда срок службы батареи закончится, ее нужно будет утилизировать.

- Извлечение аккумуляторной батареи
- Включите прибор алмазной микрошлифовки и дайте ему работать до тех пор, пока батарея полностью не разрядится.
- Снимите алмазный наконечник с прибора.
- Снимите четыре винта с круглой головкой в основании патрубка всасывания.
- Снимите четыре винта крышки.
- Подцепите переднюю и заднюю половинки корпуса и отделите их друг от друга.
- Извлеките из прибора квадратную серебряную батарею и печатную плату.
- Батарею следует утилизировать надлежащим образом.

 **ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА**

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



## Model No MD3000

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.  
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

100-240B~50/60Гц 5Bт

17/INT/ MD3000 T22-0004837 Version 04 /17

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,  
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany  
[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2017 Spectrum Brands, Inc.