

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУЧНОГО МАССАЖЕРА**

**PLANTA
МНН-10G SLIM&LIFT**



PLANTA




planta_beauty



www.planta.ru.com

Массажер оказывает разогревающее действие, что улучшает кровообращение и ускоряет обменные процессы в коже, восстанавливает ее эластичность, укрепляет стенки сосудов. Способствует похудению, уменьшает эффект «апельсиновой корки», выравнивает структуру кожи, помогает корректировать контуры тела, без появления дряблости и растяжек. Устройство предназначено для личного использования. Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta.ru.com

Описание:

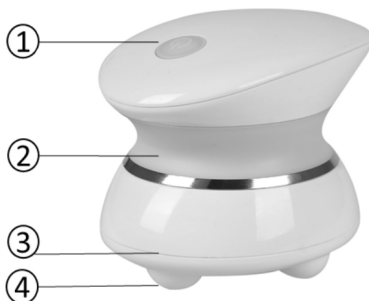

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Гибкая силиконовая вставка
3. Крышка батарейного отсека
4. Массажные узлы

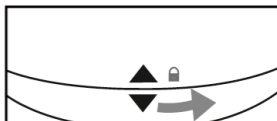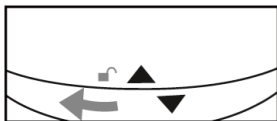

Ввод в эксплуатацию:

Открутите крышку батарейного отсека.

Поместите 2 батарейки AAA

Закройте крышку батарейного отсека так, чтобы совпали метки на корпусе и крышке.

Водонепроницаемость устройства IPX4

Предупреждения

- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.

Технические характеристики

Модель: МНН-10G

Питание от батареек 2xAAA (в комплекте)

3,0V = 1,8W

Утилизация электрооборудования

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.



Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.

ВНИМАНИЕ!

МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!



Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:
«СЯМЫНЬ КОМФОРТ САЗНС ЭНД
ТЕКНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД»
168#, Цианпу роуд, Симинг Зона, Сямынь,
Китай

Страна-производитель: Китай

Импортёр / Уполномоченная организация:
ООО «А-маркт», 127434 Россия, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 13А, эт. 1, пом. III, к. 1.
Служба поддержки потребителей:
+7 (495) 641 61 39
www.planta.ru.com

Дата производства: см. на упаковке

Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный
номер: _____

Дата
продажи: _____

Торговая
организация: _____

Изделие получил, претензий к
комплектации и внешнему виду не имею,
с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.