


Personenwaage

Typ: GS 08




Напольные весы Инструкция по применению

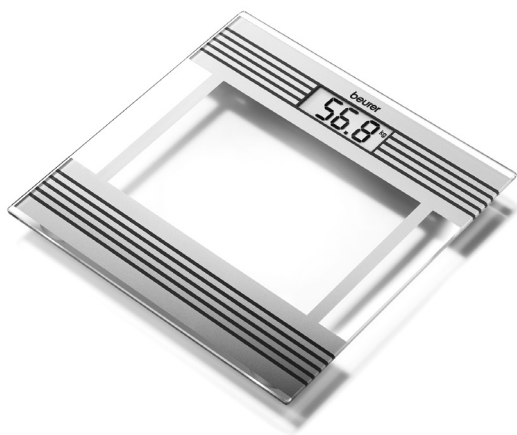





beurer

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN



1. Подготовка к работе

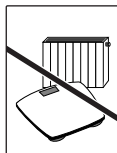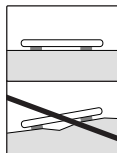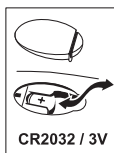



2. Взвешивание

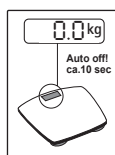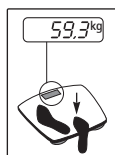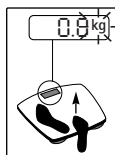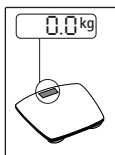



3. Сообщение об ошибке

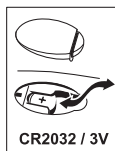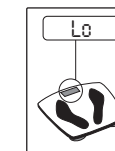

4. Чистка и уход

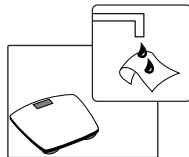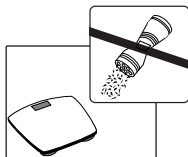

5. Переключение кг/фунты/стоуны, d=0,1 кг/0,2 фунта/1/4 стоуна

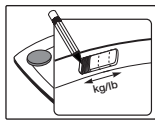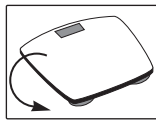


6. Опасность поскользнуться



○ Важные указания

- Весы следует устанавливать на твердом ровном полу; твердое, не прогибающееся напольное покрытие является необходимым условием точного измерения.
- Стойте неподвижно во время процесса измерения!
- Как только место установки весов будет определено, нужно легонько нажать на площадку для ног на весах для их включения
- Все весы соответствуют Директиве ЕС 89/336 с дополнениями.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в клиентскую службу.
- Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев электротоварами. Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
- Информация: Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы: Pb = в батарейке содержится свинец, Cd = в батарейке содержится кадмий, Hg = в батарейке содержится ртуть.
- Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/ЕС «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.
- Ремонт может выполняться только клиентской службой компании „Beurer“ или авторизованными торговыми организациями.

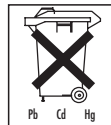

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.



Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель : Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва,
62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Hersteller und Service Deutschland
Beurer GmbH & Co. KG, Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany
Tel: 0731/3989-144, Fax – 255
www.beurer.de, kd@beurer.de

