



АППАРАТ ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЛИЦА READYSKIN

МОДЕЛЬ ZX7080

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Дата изготовления: 4 квартал 2021

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Функции прибора.....	2
Общие замечания.....	3
Показания к применению.....	4
Противопоказания.....	4
Меры безопасности.....	5
Общее описание аппарата	7
Управление прибором и дисплей.....	8
Подготовка аппарата к работе.....	9
Проведение процедур.....	10
Возможные неполадки и способы их устранения.....	18
Обслуживание аппарата.....	18
Технические характеристики.....	19
Комплектация.....	20
Правила хранения и реализации.....	20
Правила транспортировки.....	20
Сертификация.....	21
Гарантия на товар.....	21
Надлежащая утилизация.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку аппарата для ультразвуковой чистки и ухода за кожей лица ReadySkin ZX7080!

Бытовой прибор ReadySkin ZX7080 не является медицинским оборудованием. Не для применения в медицинских целях. Предназначен для ухода за кожей в домашних условиях.

Перед началом использования прибора, пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации. Уделите особое внимание главе «Меры безопасности».

Аппарат ReadySkin ZX7080 позволяет осуществлять комплексный уход за кожей на основе современных эффективных методик с использованием ультразвука и микротоков, не подвергая кожу сдавливанию, растяжению и механическому повреждению верхних слоев. Принцип действия аппарата основан на генерации регулируемого по интенсивности ультразвукового сигнала с частотой 28 кГц, вызывающего невидимые глазом колебания рабочего инструмента аппарата - металлической лопаточки.

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

Ультразвуковая чистка (пилинг)

Под действием ультразвуковых колебаний на поверхности кожи создаются микроструи жидкого пилингового средства, эффективно проникающие в поры, удаляющие из них и с поверхности кожи грязь, кожные выделения и ороговевшие клетки эпидермиса. Ультразвуковая обработка способствует глубокому очищению и одновременно насыщению кожи кислородом.

Дезинкрустация

Под действием положительного электрода щелочной раствор, соединяясь с жирной кислотой, образует мыло. Микроток воздействует на кожу через лосьон-дезинкрустант (состав электроотрицательного раствора на щелочной основе), открывает поры, разрыхляет кожу и способствует очищению от ороговевших клеток.

При проведении данной процедуры держите пальцы на металлических электродах по бокам прибора. Во время выполнения процедуры могут ощущаться легкие покалывания.

Ультразвуковой микромассаж

При использовании прибора запускается регенерация, стимулируется выработка эластина и коллагена. Ультразвуковой микромассаж обеспечивает проникновение в глубокие слои кожи косметических средств для их лучшего воздействия.

Используйте в ходе процедуры ваши омолаживающие сыворотки и активные гели, чтобы доставить к живым клеткам кожи питательные, увлажняющие, омолаживающие компоненты и запустить процессы естественного увлажнения и омоложения.

Ионофорез

Ионофорез - это процедура омоложения кожи методом воздействия маломощного электрического тока в сочетании с косметическими препаратами. Благодаря свойству тока повышается проницаемость тканей, питательные препараты достигают более глубоких слоев эпидермиса.

В режиме ION(-) проникают препараты, имеющие в составе положительно заряженные ионы.

Для корректного проведения процедуры необходимо держать пальцы на металлических электродах по бокам прибора. Во время выполнения процедуры могут ощущаться легкие покалывания.

Микротоки

В режиме EMS + ION(-) ток поступает в клетки ткани, при проведении процедуры с использованием токопроводящего геля между отрицательным и положительным электродом образуются заряженные ионы направленного действия, которые, передвигаясь в тканях, ускоряют обмен веществ, процессы восстановления и регенерации в клетках кожи.

При проведении данной процедуры держите пальцы на металлических электродах по бокам прибора. Во время выполнения процедуры могут ощущаться легкие покалывания.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Общее время проведения процедуры не должно превышать 30 минут.

Процедуры проводят 2-3 раза в неделю, курсом по 10-20 процедур.

Рекомендуется плавно увеличивать длительность (не более 30 минут) и количество прохождений по одному участку кожи в течение одного курса не более 8 раз).

Курсы процедур проводят 1-2 раза в год. Между курсами желательно проведение поддерживающих процедур один раз в месяц.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Показаниями к применению аппарата являются:

- расширенные, загрязненные поры;
- наличие огрубевшего ороговевшего слоя кожи, шелушения, рубцы и шрамы на коже (в том числе после акне);
- отеки, темные круги в области глаз;
- нарушения в работе сальных желез кожи: сухая, обезвоженная, или наоборот, чрезмерно жирная кожа;
- пигментные пятна и пятна после воспалений;
- возрастные изменения: морщины, снижение тонуса кожи, тусклый цвет лица и пр.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением процедур необходима предварительная консультация врача-дерматолога.

ВНИМАНИЕ! АППАРАТ ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЛИЦА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к проведению процедур являются:

- нарушения сердечного ритма (аритмия), носящие приступообразный характер (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, групповая экстрасистолия);
- недостаточность кровообращения свыше II степени;
- болезни крови, тромбозы;
- ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов;

- онкологические заболевания;
 - нарушение целостности кожных покровов – раны, ссадины, трофические язвы;
 - повышение температуры тела;
 - гипертония;
 - герпес;
 - острые воспалительные и гнойные процессы;
 - нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервов;
 - период беременности;
 - психические заболевания;
 - наличие имплантатов, располагающихся под кожей или мышцах (золотые нити, металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты, брекеты;
 - плохое общее самочувствие (рекомендуется перенести процедуру).
- Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах: глаза, области над сердцем и щитовидной железой, половые органы, над силиконовыми имплантатами, области с гелевой контурной пластикой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Аппарат ReadySkin ZX7080 достаточно прост в использовании, однако, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в ней требования по работе с аппаратом.

Внимание:

- Аппарат рассчитан на питание от встроенного аккумулятора. Для зарядки используйте идущий в комплекте USB кабель и адаптер. Перед подключением кабеля к сети убедитесь, что кабель не имеет видимых повреждений изоляции.
- Проводите регулярную проверку состояния металлических аппликаторов прибора. При обнаружении острых кромок или глубоких царапин на рабочей поверхности аппликаторов дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения дефектов при помощи полировки.
- Запрещается эксплуатация и хранение аппарата в местах с повышенной влажностью (саунах, ванных комнатах) и высоких температурой, под прямыми солнечными лучами.
- После внесения аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать не менее 2-х часов перед подключением аппарата к сети и

началом использования.

- Во время проведения процедуры с использованием ReadySkin ZX7080 запрещается касаться или быть подключенным к другому электрооборудованию или заземлению.
 - Запрещается работать аппликаторами прибора по сухой коже.
- Поддерживайте поверхность кожи постоянно увлажненной при помощи специальных средств (тоники, сыворотки, лосьонов или гелей) или чистой воды.
- Во время процедуры не рекомендуется многократная (более 8 раз) обработка аппликаторами одного и того же участка кожи.
 - Выключайте питание аппарата во время перерывов в работе, если их продолжительность превышает 30 сек.
 - Не допускайте попадания воды или косметических средств внутрь прибора, регулярно удаляйте влагу с металлических поверхностей аппликаторов. Категорически запрещается погружать прибор в жидкость.
 - После использования аппарата в течение 20 минут необходимо сделать перерыв не менее чем на 30 минут, чтобы дать аппарату остыть.
 - Не оставляйте включенный аппарата без присмотра.
 - Перед и после проведения процедуры очищайте рабочую поверхность аппликаторов дезинфицирующим раствором (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода).
 - Не нажимайте на кнопку управления прибором острыми предметами или кончиками ногтей.
 - Храните аппарат вдали от нагревательных приборов и в защищенном от солнечных лучей месте.
 - Храните аппарат в недоступном для детей месте.
 - Не используйте прибор в помещениях с высокой влажностью и температурой.
 - Использование прибора детьми допускается только в возрасте от 16 лет и под наблюдением взрослых. Людям с ограниченными физическими и умственными возможностями перед использованием аппарата необходимо внимательно ознакомиться с устройством и возможными рисками.
 - Не рекомендуется разбирать или самостоятельно ремонтировать устройство. Сервисное обслуживание аппарата должно производиться только в специализированных центрах.
 - Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
 - В случае необходимости ремонта обратитесь в уполномоченный

сервисный центр

Внимание:

Фирма-производитель и торгующая организация не несут никакой ответственности за последствия применения аппарата, вызванные нарушением текущих правил эксплуатации или несоблюдением методик проведения процедур.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Ультразвуковой аппарат ReadySkin ZX7080 состоит из электронного блока со встроенным ультразвуковым преобразователем. Аппликаторы прибора выполнены в виде лопаточки трапецевидной формы и массажного ролика (микротоки). Работа может осуществляться в двух режимах ION(-) и ION(+), чему свидетельствует надпись на дисплее прибора. Внешний вид прибора приведен на рис.1.



Рис.1. Внешний вид прибора ReadySkin ZX7080.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ И ДИСПЛЕЙ

Ультразвуковой аппарат ReadySkin ZX7080 имеет интуитивно понятный ЖК-дисплей. Управление осуществляется посредством кнопки включения/выключения. Аппликаторы прибора выполнены в виде лопаточки трапецевидной формы.

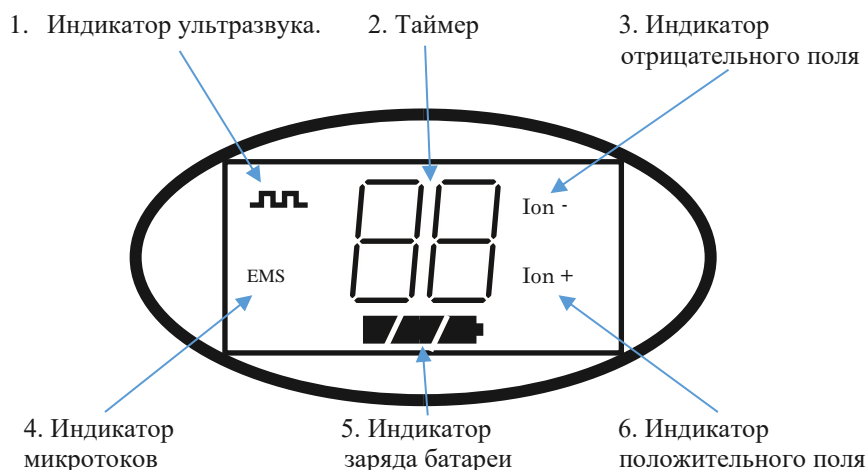


Рис.2. Схема дисплея прибора ReadySkin ZX7080.

Прибор включается при длительном нажатии (2 сек.) на кнопку управления, дисплей загорается синим цветом.

По умолчанию при включении прибора включается функция микротоков ION(-), также об этом сигнализирует надпись на дисплее «EMS» (электромассаж).

Последующее нажатие на кнопку управления запускает режим генерации ультразвука ION(+). Для выключения аппарата нажмите и удерживайте кнопку управления (3 сек.) Таймер на дисплее отображает количество минут работы в текущем режиме. Прибор автоматически выключится после 10 минут бездействия.

ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

Подготовка:

Проведите визуальный осмотр аппарата на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что аппликаторы не имеют повреждений и острых сколов.

Зарядка прибора:

От компьютера:

Включите компьютер и затем подсоедините прибор при помощи USB кабеля. На дисплее загорится соответствующий индикатор «СН». Деления означают степень заряда аккумулятора. Отсоедините прибор от источника питания, когда на экране будут отображены три немигающих деления.

От розетки:

Подсоедините прибор с помощью кабеля к адаптеру (входит в комплект поставки), затем подсоедините адаптер в розетку. На дисплее загорится соответствующий индикатор «СН». Деления означают степень заряда аккумулятора. Отсоедините прибор от источника питания, когда на экране будут отображены три немигающих деления.

Рекомендуемые производителем параметры адаптера питания:

Выходное напряжение: AC 220В

Выходное напряжение: DC 5В

Выходной ток: 1 А

Разъем выходной: USB, тип А

Во время зарядки использование прибора по назначению автоматически становится в режим зарядки, на экране загорается надпись «СН».

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР

Перед проведением процедур рекомендуется проконсультироваться с Вашим врачом-дерматологом.

При проведении процедур кожа обязательно должна быть увлажнена. Не допускается проведение процедур по сухой коже!

В процессе обработки кожи вы можете почувствовать легкое покалывание, легкий дискомфорт.

Немедленно остановите процедуру, если почувствуете боль, незамедлительно обратитесь к врачу.

Во время работы наблюдайте за ощущениями и состоянием кожи. При появлении дискомфорта следует прекратить работу.

Во время процедур рекомендуем двигаться металлической лопаткой/металлическим роликом по массажным линиям лица, как показано на рисунке справа.



Количество прохождений по одному участку кожи в течение одного сеанса не должно превышать 3-х раз.

Основной курс процедур: 1-2 раза в неделю, курсом по 10-20 процедур.

Поддерживающий курс: 1 раз в месяц.

Курсы процедур проводят 1-2 раза в год. Между курсами желательно проведение поддерживающих процедур один раз в месяц.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА (ПИЛИНГ)

Принцип действия:



Процедура деликатного очищения кожи лица.

За счет ультразвуковых волн, проникающих в верхние слои кожи, происходит отшелушивание ороговевших клеток эпидермиса, удаление поверхностных загрязнений и скоплений кожного сала. Ультразвуковая обработка способствует очищению, легкому массажу, стимуляции процессов кислородно-восстановительного обмена и регенерации в клетках.

Режим аппарата: Ультразвук + ION(+)


Дополнительные препараты для проведения процедуры:

- гель для ультразвуковых процедур/термальная вода/тоник или пр.

Частота проведения процедуры: не более 1 р в день

Этапы проведения процедуры:

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите на лицо гель для ультразвуковых процедур/термальную воду/тоник или пр.
3. Снимите защитный колпачок с металлической лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-х секунд. Включится режим ультразвуковой чистки Ультразвук + ION(+).
5. Расположите металлическую лопатку аппарата под углом в 45 градусов, как показано на рисунке справа.
6. Проводите лопаткой по массажным линиям лица вдоль проблемных зон. Удаляйте излишки геля с лопатки при помощи ватного диска.
7. Смойте остатки геля с лица теплой чистой водой

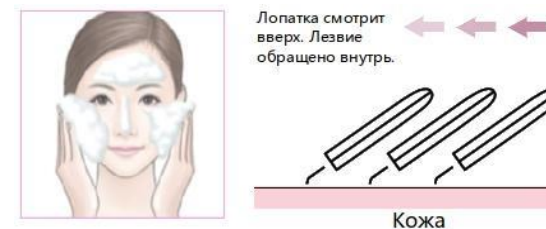

Возможные ощущения во время процедуры:

Легкая вибрация.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности кожи. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.

ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

Принцип действия:



Процедура глубокого очищения кожи лица.

Метод основан на действии химической реакции, для запуска которой необходимо нанести на кожу специальные ионизированные гели-дезинкрустанты, которые проводят электрические импульсы.

Под действием тока и специальных гелей на коже образуются ионы щелочей и кислот, которые проникают в слои кожи, вступают в реакцию с кожным салом, шлаками, токсинами и другими загрязнениями, образуя мыло. Таким образом комедоны растворяются и легко выводятся из кожи. Происходит отшелушивание ороговевших клеток и обновление кожных покровов.

Режим аппарата: Ультразвук + ION(+)

Дополнительные препараты для проведения процедуры:

- гель для дезинкрустации.

Частота проведения процедуры: не более 2-3 р в неделю

Этапы проведения процедуры:

- Тщательно очистите кожу лица.
- Нанесите на лицо гель для дезинкрустации.
- Накройте лицо пленкой (полипропиленовой или целлофановой), обходя области глаз и рта, подождите 10 мин. В течение этого времени поры раскроются. Кожа будет готова к проведению чистки.

- Снимите защитный колпачок с лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-х секунд. Включится режим чистки Ультразвук + ION(+)

- Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцами руки зажать боковые электроды.



- Расположите металлическую лопатку аппарата под углом в 45 градусов, как показано на рисунке справа.
- Проводите лопаткой по массажным линиям лица.
- Удаляйте излишки средства с лопатки ватным диском.

Возможные ощущения во время процедуры:

Легкая вибрация.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности кожи. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Принцип действия:



Процедура глубокого питания и увлажнения кожи.

Процедура основана на проведении маломощного гальванического тока, который воздействует на верхние и средние слои дермы. Благодаря импульсу тока активные компоненты уходовых средств могут достигать

более глубоких слоев дермы, повышая эффективность.

За счет такого воздействия косметические препараты лучше усваиваются, обеспечивая стойкое антивозрастное, увлажняющее и питательное действие.

Режим аппарата: EMS + ION(-)



Дополнительные препараты для проведения процедуры:

- косметические средства для ухода за кожей лица (эссенции/сыворотки) *
- гель для ультразвуковых процедур.

* для результативности процедуры рекомендуем пользоваться питательными косметическими средствами (эссенциями/сыворотками и пр.) с положительными ионами.

Частота проведения процедуры: не более 2-3 р в неделю

Этапы проведения процедуры:

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите косметическое средство для ухода за кожей лица, а поверх него – гель для ультразвуковых процедур.
3. Снимите защитный колпачок с лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-х секунд. По умолчанию включится режим Ультразвук + ION(+). Переключите аппарат в режим EMS + ION(-).
5. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцами руки зажать боковые электроды.
6. Расположите металлическую лопатку аппарата плоской стороной к коже, как показано на рисунке справа.
7. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки средства с лопатки ватным диском.
8. Смойте остатки средства теплой чистой водой.

Возможные ощущения во время процедуры:

Еле заметное покалывание.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности Вашей кожи.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖ

Принцип действия:

Во время работы аппарат оказывает ионизирующий эффект (ион «+»). Ток поступает в клеточные ткани, оказывает стимуляцию высокочастотной вибрацией.

В ходе процедуры запускается регенерация, стимулируется выработка эластина и коллагена. Ультразвуковой микромассаж обеспечивает проникновение в глубокие слои кожи косметических средств для их лучшего воздействия.

Режим аппарата: Ультразвук + ION(+)

Дополнительные препараты для проведения процедуры:

- косметические средства для ухода за кожей лица*
- гель для ультразвуковых процедур.


Частота проведения процедуры: не более 1 р в день

Этапы проведения процедуры:

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите косметическое средство для ухода за кожей лица, а поверх него – гель для ультразвуковых процедур.
3. Снимите защитный колпачок с лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-х секунд. По умолчанию включится режим Ультразвук + ION(+). Переключите аппарат в режим Ультразвук + ION(+).
5. Расположите металлическую лопатку аппарата плоской стороной к коже, как показано на рисунке справа.
6. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки средства с лопатки ватным диском.



7. По завершению процедуры смойте остатки средства теплой чистой водой.
8. После проведения процедуры рекомендуется нанести увлажняющую маску с гиалуроновой кислотой.

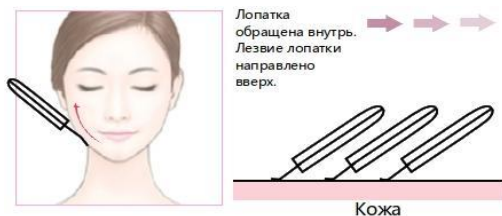

Возможные ощущения во время процедуры:

Легкая вибрация и покалывание кожи.
Интенсивность ощущений зависит от чувствительности Вашей кожи.

МИКРОТОКИ

Принцип действия:

Микротоки воздействуют на мышцы лица, вызывают их слабые сокращения, которые невозможно увидеть, но при этом способствуют выведению избыточной жидкости из тканей. Кроме того, микротоковая терапия влияет на мышечные волокна стенок сосудов, укрепляя их и нормализуя кровообращение и лимфообращение. Отсюда уменьшается отечность.

Микротоки воздействуют на эпидермис с нескольких сторон, активизируя работу клеток, улучшает проникновение активных компонентов кремов и сывороток в глубокие слои эпидермиса.

Режим аппарата: EMS / EMS + ION(-)

Дополнительные препараты для проведения процедуры:

- косметические средства для ухода за кожей лица - (не обязательно)
- гель для ультразвуковых процедур.

Частота проведения процедуры: не более 2-3 р в неделю

Этапы проведения процедуры:

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Снимите защитный колпачок с механического металлического ролика. Обработайте ролик антисептическим средством.
3. Нанесите косметическое средства для ухода за кожей лица, а поверх него - гель для ультразвуковых процедур. Уходовые средства во время процедуры применять не обязательно - можно просто использовать гель.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-х секунд. По умолчанию включится режим Ультразвук + ION(+). Переключите аппарат в режим EMS + ION(-). Для чувствительной кожи - режим EMS.
5. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцами руки зажать боковые электроды
6. Аккуратным движением проводите роликом по массажным линиям 2-3 раза.
7. Удаляйте излишки средства при помощи ватного диска.
8. По завершению процедуры смойте остатки средства теплой чистой водой.



Возможные ощущения во время процедуры:
Допустимо еле заметное покалывание кожи.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прибор не включается.	Нет заряда. Кнопка включения была нажата не до конца. Не удерживали кнопку включения на протяжении 2 секунд.
Отсутствует ультразвуковая стимуляция.	Не выбран соответствующий режим работы.
Прибор нагревается во время использования.	Это не является неисправностью, потому что во время работы прибора осуществляется выработка тепла.
После зарядки устройства прибор работает всего несколько минут.	Недостаточно заряжен аккумулятор. Срок службы аккумулятора истек.

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, то необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера по телефону 8-800-775-56-29, e-mail: garotdel@mail.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА

Перед началом и по окончании каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку металлических аппликаторов прибора при помощи мягкой салфетки, смоченной в антисептическом растворе (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода). Периодически протирайте корпус прибора мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством (прибор при этом должен быть выключен).

Внимание!

- Антисептическое средство не должно попадать внутрь пластикового корпуса прибора. Используйте салфетки с умеренным количеством жидкости.

Запрещается:

- Погружать прибор в жидкость
- Использовать для протирки аппликаторов и корпуса агрессивные средства и растворители
- Применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем
- Подвергать аппарат сильному механическому воздействию
- Внутри аппарата ReadySkin ZX7080 нет компонентов или частей, требующих обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ультразвука	28 кГц
Выходная мощность ультразвуковых колебаний	1-1,2 Вт/см ²
Напряжение	5 В
Входное напряжение адаптера питания	220 В
Сила тока	1 А
Время полной зарядки	1 ч
Длительность непрерывного использования	1,5 ч
Размер прибора	180x42x27 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Прибор ReadySkin ZX7080.
2. USB кабель.
3. Адаптер для зарядки.
4. Руководство по эксплуатации на русском языке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% в соответствии с ГОСТ В9.003 и ГОСТ 21552.

В помещениях, где хранятся изделия не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию.

Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001 и ГОСТ 21552 автомобильных, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние,

при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах - в контейнерах.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Readyskin ZX7080 соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза 020/2011, 004/2011 и 037/2016.

ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

Гарантийный период на изделие Readyskin ZX7080 составляет 12 месяцев со дня поставки.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

-отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменении конструкции или схемы изделия, возникших после передачи товара потребителю;

- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.

- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

Завод-изготовитель	«Shenzhen Trendz Technology Co., Ltd» Сделано в КНР
Адрес завода-изготовителя	Китай, 4/F., Bldg. B&C, Hedong Industrial Park, Hangcheng industrial Zone, Qianjin Road #2, Xixiang Town, Bao'an Dist., Shenzhen
Импортер	ООО «Р-Дистрибуция» Адрес: 195267, Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, дом № 86, корпус 1, помещение 12Н
Горячая линия (звонок по России бесплатный)	 8-800-775-56-29

Надлежащая утилизация продукта



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

