

# Сменные ролики к прибору POLARIS PSR 0701 для ухода за кожей

## Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

### Сфера использования

Данные сменные ролики являются аксессуарами – шлифовальными роликами для прибора PSR 0701 для удаления сухой огрубевшей кожи и мозолей на ногах в бытовых условиях (прибор приобретается отдельно). Запрещается использовать ролики на других приборах.

**Примечание: Шлифовальные ролики являются расходным материалом.**


### Описание работы

Вращаясь на скорости около 30 оборотов в секунду, шлифовальный ролик удаляет огрубевшую кожу на пятках и других частях ступни, эффективно шлифуя поверхность кожи.

### Замена шлифовального ролика

Срок службы шлифовального ролика определяется частотой эксплуатации прибора и масштабами обработки. При необходимости Вы можете заменить ролик, или снять его для чистки прибора после использования.

- 1) Убедитесь, что переключатель скорости находится в положении «0».
- 2) Чтобы осуществить замену шлифовального ролика, поверните движок снятия ролика по часовой стрелке.

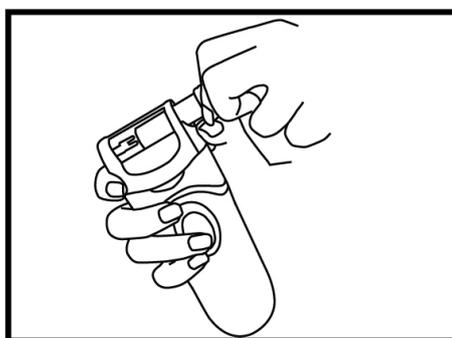

- 3) Выдвиньте ролик в правую (по рисунку) сторону из корпуса рабочей головки.
- 4) Вставьте новый шлифовальный ролик на место прежнего. Для фиксации нового ролика необходимо повернуть его движок против часовой стрелки до упора.


## **Внимание:**

*Запрещается включать прибор, если не установлен шлифовальный ролик.*

## **Чистка прибора**

Проводите чистку прибора после каждого использования.

- Прочистите прибор с помощью щеточки, входящей в его комплект. Во время чистки запрещается включать прибор.

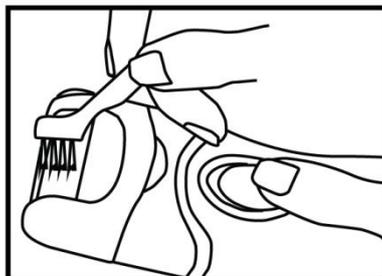

Для тщательной очистки рекомендуется снять шлифовальный ролик и вычистить щёткой сам ролик и место его установки.

- Соберите прибор. Протрите корпус прибора чистой сухой тканью.
- Допускается только сухая чистка прибора щеткой, запрещается мыть прибор под водой.
- Хранить прибор и ролики к нему рекомендуется в заводской упаковке в сухом прохладном месте.

## **I**

***Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.*

***Примечание:** Более подробные правила эксплуатации представлены в руководстве, прилагаемом непосредственно к прибору по уходу за кожей PSR 0701.*

## **Производитель:**

**TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»**

**1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America**  
**1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки**

## **Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии**

**ООО «ДС-Сервис»**

**109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5**

**Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78**

