



Körperanalysewaage mit Bluetooth Body Analysis Scale with Bluetooth



DE Kurzanleitung
GB Quick Start Guide
FR Instructions brèves
NL Korte handleiding
ES Instrucciones breves
PT Manual breve
IT Guida rapida
FI Pikaopas

SE Snabbstartsguide
RU Краткое руководство
GR Συνοπτικές οδηγίες
CZ Stručný návod
HU Rövid útmutató
PL Skrócona instrukcja
TR Başvuru kılavuzu



Art. No. 40422 / 40423

Обязательной сертификации не подлежит



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по применению, обратив особое внимание на раздел с указаниями по технике безопасности. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

- Используйте прибор только в соответствии с его назначением, следуя руководству по использованию.
- При использовании не по назначению теряется право на гарантию.
- Этот прибор не подходит для беременных!
- В целях безопасности следует избегать проведения анализа содержания жира в организме ребенка, так как через тело протекает электроток. Взвешивания можно выполнять безо всяких опасений.
- Эти весы не подходят для людей с кардиостимуляторами или другими медицинскими имплантатами. При сахарном диабете или других медицинских / соматических ограничениях сведения о содержании жира в организме могут оказаться неточными. То же касается и людей с очень хорошей спортивной подготовкой.
- Не используйте прибор при неисправном функционировании в результате попадания или погружения в воду или повреждения.



Оберегайте прибор от влаги. Держите весы подальше от воды. При сырости и влажности поверхность весов становится скользкой. Следите, чтобы поверхность была сухой.



Опасность поскользнуться!

Никогда не становитесь на весы мокрыми ногами. Никогда не становитесь на весы в носках.



Опасность опрокидывания! Никогда не устанавливайте весы на неровной поверхности. При взвешивании никогда не становитесь на одну сторону или на край весов.

Настоящим мы заявляем, что персональные весы модели BS 430 connect / BS 440 connect арт. 40422/40423 соответствуют основным требованиям европейской директивы R&TTE 1999/5/EG. Полное ЕС-заявление о соответствии товара Вы можете затребовать по адресу Medisana AG, Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, Германия или загрузить на сайте Medisana (www.medisana.com/bs430connect) (www.medisana.com/bs440connect).

Для получения дополнительной информации и адресов сервисных центров в Вашей стране пройдите по ссылкам, указанным ниже: www.medisana.com/bs430connect / www.medisana.com/bs440connect. Обязательной сертификации не подлежит

Простое взвешивание с помощью функции „Step-On“




- 1 Просто станьте на весы.
- 2 Будет показан ваш вес.

Установка персональных данных на весах

Весы могут сохранить данные (пол, режим спортсмена, рост, возраст) 8 человек.


На весах предварительно установлены следующие значения: мужчина, 165 см, 30 лет, кг.

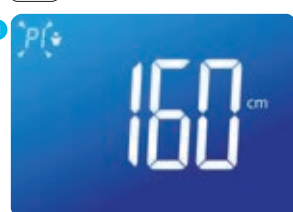


- 1 Нажимайте кнопку SET, пока на дисплее не начнет мигать ячейка памяти.
- 2 Выберите нужную ячейку памяти с помощью кнопок ▲/▼.

1 Нажимайте кнопку SET, пока на дисплее не начнет мигать ячейка памяти.

2 Выберите нужную ячейку памяти с помощью кнопок ▲/▼.

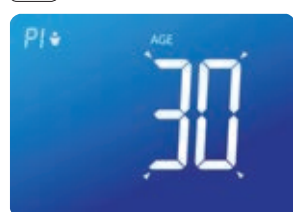


3 Чтобы сохранить выбор, нажмите кнопку Set. Продолжайте соответствующим образом, чтобы выполнить установки для пола, режима спортсмена, роста, возраста.

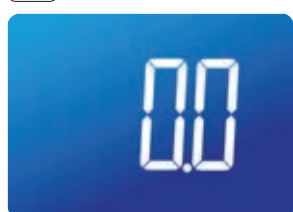

4 После установки ваших персональных данных на дисплее появится индикация "0.0".

5 Чтобы завершить настройку весов, просто станьте на весы.

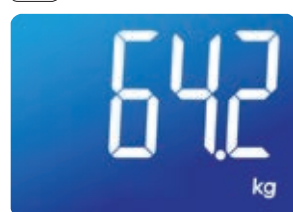

6 На дисплее показываются следующие результаты измерений:

- вес
- содержание жира в организме
- содержание воды в организме
- мышечная масса
- вес костей
- BMR (потребность в калориях)
- BMI (индекс массы тела)




Соедините весы со своим смартфоном

Нужно один раз соединить между собой весы и смартфон по Bluetooth®.

Установите актуальное приложение VitaDock+ и выполните указанные далее шаги.




1 Бесплатная загрузка приложения VitaDock+ на AppStore или Google Play Store.

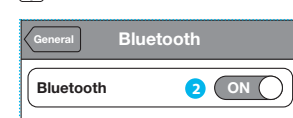

2 Включите Bluetooth® на своем устройстве iOS или Android.

3 Запустите приложение.

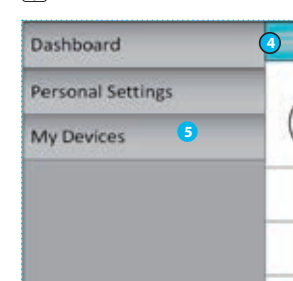


4 Выберите в приложении раздел "Настройки".


5 Там нажмите на "Мои устройства".




6 Чтобы создать соединение между смартфоном и весами нажмите кнопку SET, выберите свою ячейку памяти и станьте на весы.

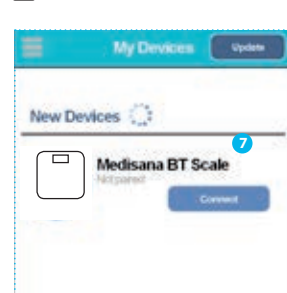

7 Выберите свои весы, чтобы соединить их с помощью приложения.

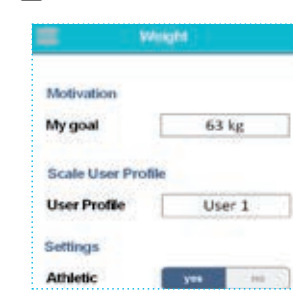


8 Чтобы иметь возможность использовать все функции весов, выполните персональные установки в приложении.

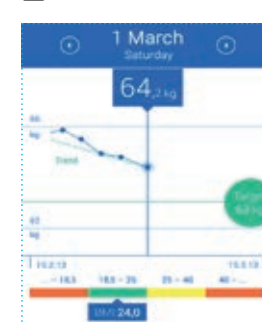

9 Данные измерений автоматически переносятся и сохраняются в приложении.

Взвешивание с помощью вашего смартфона и приложения VitaDock+

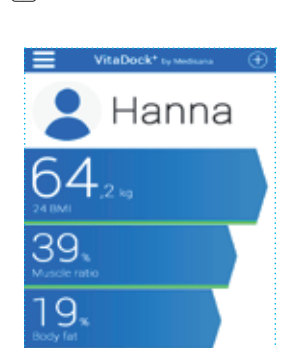

1 Запустите приложение.




2 Станьте на весы.



6 На дисплее показываются следующие результаты измерений:

- вес
- содержание жира в организме
- содержание воды в организме
- мышечная масса
- вес костей
- BMR (потребность в калориях)
- BMI (индекс массы тела)

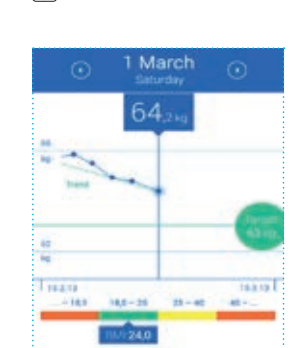

4 Данные измерений автоматически переносятся и сохраняются в приложении.

MEDISANA®

Jagenbergstraße 19 • 41468 Neuss • Germany
Tel. +49 (0) 2131 / 36 68 0 • Fax 49 (0) 2131 / 36 68 50 95
info@medisana.de • www.medisana.de